



製造販売元 **株式会社YDM**
〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006
問 合 先 デンタル事業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL: 03-3828-3161 FAX: 03-3827-8991
http://www.ydm.co.jp/ E-mail: ydm@ydm.co.jp

掲載製品の標準価格は、2025年5月21日現在のものです。標準価格に消費税等は含まれておりません。
製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがございます。

YDM オフィシャル SNS では様々な情報を発信しております。



基本 Fundamentals



エキスプローラー 片頭



1/1



#3 コード No.01003
標準価格 1,430円



#5 コード No.01005
標準価格 1,430円



#9 コード No.01009
標準価格 1,430円



#23 コード No.01023
標準価格 1,430円



#25 コード No.01025
標準価格 1,430円

- 先端部が細く、適度な弾力があるため、先端から伝わる振動で微細な歯面の状態まで探知できます。
- 歯肉縁下歯石やカリエスの探知、補綴物マージン部のチェックなどに有効です。



#3A コード No.01031
標準価格 2,000円

- 先端部が太く、強度が高くなっています。



マルチ コード No.01030
標準価格 1,430円



#23BS コード No.01024
標準価格 1,430円



角柄 #9 コード No.01109
標準価格 1,430円



島峰型 #1 コード No.01151
標準価格 1,650円


医療機器届出番号 1181X1000664D102
一般的名称 歯科用探針 販売名 エクスプローラー

エキスプローラー 片頭



1/1

- 先端が丸いので小窩裂溝の健全組織を破壊することなく、齲蝕チェックができます。
- 歯石の有無の確認、シーラントの充填にも有効です。

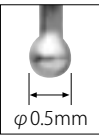


ボールポイント #1 コード No.01221
標準価格 1,760円

医療機器届出番号 1181X1000664D102
一般的名称 歯科用探針 販売名 エクスプローラー


エキスプローラー 両頭




1/1

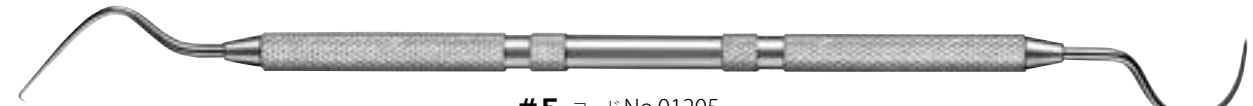

#5 コード No.01205
標準価格 1,980円

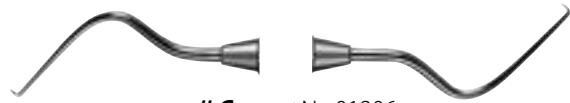

#6 コード No.01206
標準価格 1,980円

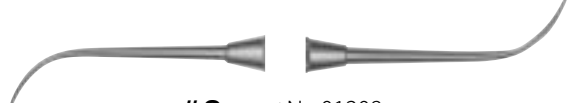

#8 コード No.01208
標準価格 1,980円



#3-9 コード No.01209
標準価格 1,980円

- 先端部が細く、適度な弾力があるため、先端から伝わる振動で微細な歯面の状態まで探知できます。
- 歯肉縁下歯石やカリエスの探知、補綴物マージン部のチェックなどに有効です。
- グレーシークュレット #11-12 とシャンクが同じ形状のため、臼歯部隣接面の深いポケット内にも届きます。



#11-12 コード No.09224
標準価格 2,300円



医療機器届出番号 1181X1000664D102
一般的名称 歯科用探針 販売名 エクスプローラー

エキスプローラー エンド用



1/1

- 根管口や根管内の探索、根管内石灰化部の除去に有効です。



#16 コード No.01316
標準価格 4,070円



写真提供 : 石井 宏先生
(ペンシルバニア大学 非常勤講師
神奈川歯科大学 非常勤講師)

医療機器届出番号 1181X1000664D102
一般的名称 歯科用探針 販売名 エクスプローラー

エキスプローラー ポイント式



- ハンドルとポイントの組合せが自由に選択できます。
 - 古くなったポイントだけを交換し、ハンドルを繰り返し使用できるので経済的です。
- ※滅菌・消毒の際は、サビの発生を防ぐためポイントを外して下さい。

ポイント式 分解図



ハンドル片頭

P-A コード No.10201
標準価格 **3,200**円
サイズ／φ8.0mm

P-F コード No.10205
標準価格 **3,200**円
サイズ／φ6.0mm

ハンドル両頭

P-B コード No.10202
標準価格 **4,000**円
サイズ／φ8.0mm

P-C コード No.10203
標準価格 **4,000**円
サイズ／φ6.0mm

P-Aハンドル

医療機器届出番号 11B1X1000634D003

一般的名称 ナイフハンドル

販売名 P-Aハンドル

P-Fハンドル

医療機器届出番号 11B1X1000634D007

一般的名称 ナイフハンドル

販売名 P-Fハンドル

P-Bハンドル

医療機器届出番号 11B1X1000634D004

一般的名称 ナイフハンドル

販売名 P-Bハンドル

P-Cハンドル

医療機器届出番号 11B1X1000634D005

一般的名称 ナイフハンドル

販売名 P-Cハンドル

2/3

ポイント

1/1

#3
コード No.23103
標準価格 **2,400**円 (3入)

#9
コード No.23109
標準価格 **2,400**円 (3入)

#18
コード No.23118
標準価格 **2,400**円 (3入)

#18A
コード No.23119
標準価格 **2,400**円 (3入)

#23
コード No.23123
標準価格 **2,400**円 (3入)

#25
コード No.23125
標準価格 **2,400**円 (3入)

#S1
コード No.23151
標準価格 **2,400**円 (3入)

医療機器届出番号 11B1X1000664D105

一般的名称 歯科用探針

販売名 エキスプローラー ポイント式

カラーリング

インスツルメントの識別や管理に便利！



エキスカベーター



角 柄

1/1



#1 コードNo.01501
標準価格 **3,740**円
63-64



#2 コード No.01502
標準価格 **3,740**円
65-66



#3 コード No.01503
標準価格 **3,740**円
17-18



#4 コード No.01504
標準価格 **3,740**円
21-22



#5 コード No.01505
標準価格 **3,740**円
65A-66A



#6 コード No.01506
標準価格 **3,740**円
19-20

丸 柄

品名	#1	#2	#3	#4	#5	#6
コードNo.	01511	01512	01513	01514	01515	01516



標準価格 **3,740**円



NC #18 コード No.11305
標準価格 3,200円



NC #18 セレーション付 コード No.11306
標準価格 3,400円



NC #18 ダイヤモンド付 コード No.11307
標準価格 6,800円



ミニ #18 コード No.11308
標準価格 3,200円




ミニ #18 セレーション付 コード No.11309
標準価格 3,400円



プレミアム コード No.11019
標準価格 3,800円

- ソフトタッチのピンセット。
- きめ細やかな仕上げにより、先端精度が優れています。

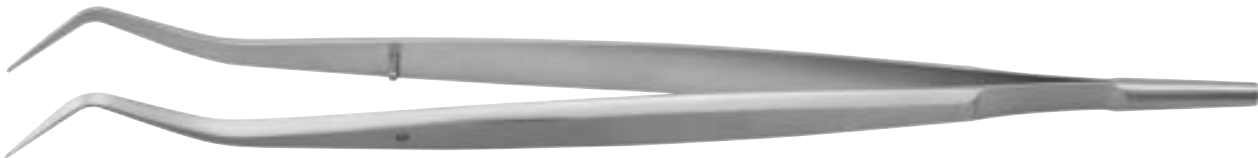

高歯型 コード No.11020
標準価格 4,800円

ミラートップ クリアー 2



●薄いガラスを使用しており、像のブレが少なく、鮮明に映ります。

1/1



3P コード No.13071
標準価格 6,400円 (20入)



4P コード No.13073
標準価格 6,400円 (20入)

※反射率 約93%
※鏡面厚さ 1.9mm
※耐熱温度 200℃


医療機器届出番号 11B1X1000625D007
一般的名称 歯鏡 販売名 ミラートップ

ミラートップ フロントサーフェイス



●鏡表面で反射するため、像が二重にならずに鮮明に映ります。
また、反射率は約98%で明るく映ります。
●マイクロスコープや拡大鏡下では特に有効です。


▶表面反射式
▶チタンコーティング

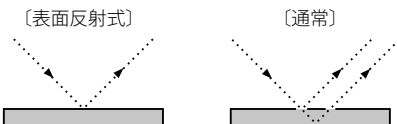

1/1



3P コード No.13077
標準価格 8,800円 (12入)

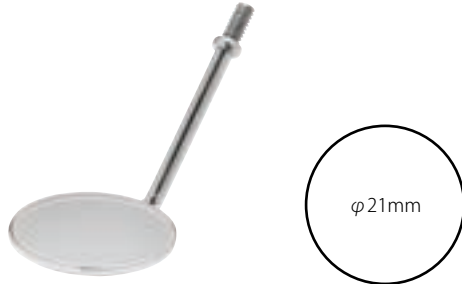

4P コード No.13079
標準価格 8,800円 (12入)

※反射率 約98%
※鏡面厚さ 1.9mm
※耐熱温度 200℃


医療機器届出番号 11B1X1000625D007
一般的名称 歯鏡 販売名 ミラートップ

メタルミラー




●ステンレス製なので割れる心配がなく、
小児歯科・障害者歯科等の治療に適しています。
●鏡表面で反射するため、像が二重にならずに鮮明に映ります。
●両面ミラーのため、粘膜を排除しながら鏡視できます。

▶表面反射式

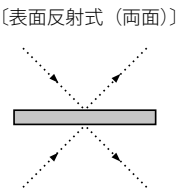

1/1

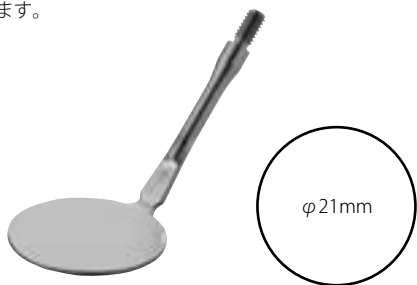

コード No.13131
標準価格 12,000円 (6入)

※反射率 約65%
※厚さ 0.8mm

医療機器届出番号 11B1X1000625D006
一般的名称 歯鏡 販売名 メタルミラー

ミラーハンドル スケール付



●ハンドル後部にエンドファイルやリーマーの計測ができるスケールが付いています。
●治療中に長さや大きさを確認したい際、スケールを用意する手間が省けて便利です。

1/1



グリーン コード No.13118
標準価格 600円



ブルー コード No.13119
標準価格 600円



ピンク コード No.13120
標準価格 600円

※材質 PP 耐熱温度149℃


[エンドファイル・リーマーの計測方法]



①ハンドル後面の溝縁に
ストッパーをあてます。
ファイル・リーマーを後方
へ引き、ストッパーを先端
方向へ移動させます。



②スケール部の
溝縁にストッパー
をあててファイ
ル・リーマーを計
測します。

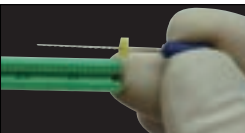

③計測値にスト
ッパーが設定
されます。

※計測範囲：0mm～30mm

医療機器届出番号 11B1X1000625D003
一般的名称 歯鏡 販売名 ミラーハンドル

ミラーハンドル



1/1



角型 コード No.13121
標準価格 800円



SC型 コード No.13127
標準価格 900円




YS型 コード No.13128
標準価格 800円

医療機器届出番号 11B1X1000625D003
一般的名称 歯鏡 販売名 ミラーハンドル

検診用インスツルメント



1/1

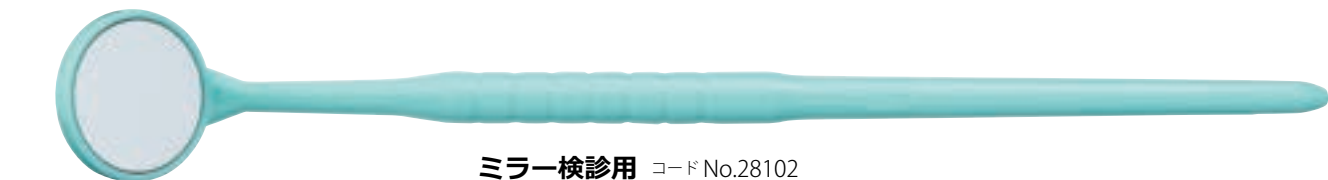

ミラー検診用 コード No.28102
標準価格 6,430円 (50本入)

●曇り止め加工がされています。



エクスプローラー検診用 コード No.28101
標準価格 8,000円 (50本入)



ペリオプローブ検診用 コード No.28107
標準価格 14,000円 (50本入)



※ディスプレイタイプ(未滅菌)
※薬液消毒、EOG滅菌可能

ミラー検診用 医療機器届出番号 11B1X1000625D001
一般名称 歯鏡 販売名 ミラー 検診用
エクスプローラー検診用 医療機器届出番号 11B1X100064D103
一般名称 歯科用探針 販売名 エクスプローラー 検診用
ペリオプローブ検診用 医療機器届出番号 11B1X100064D004
一般名称 歯周ポケットプローブ 販売名 ペリオプローブ 検診用

ストップング除去器



1/1



10 コード No.03010
標準価格 2,200円

医療機器届出番号 11B1X100064ZD014
一般名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 ストップング除去器


ストップング キャリア



1/1



コード No.13200
標準価格 4,200円

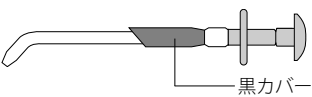

黒カバー

※黒カバー 材質 エポナイト (ラテックス含有)

医療機器届出番号 11B1X100065D801
一般名称 歯科用注入器具 販売名 ストップングキャリア

バキュームチップユニバーサル




2/3

- 管内のトラップがないので、清掃しやすくなっています。(トラップは別売の先端ゴムに付いています。)
- バキューム部内径φ10～φ11mmのユニットに使用できます。



90° コード No.13612
標準価格 7,260円 (5入)

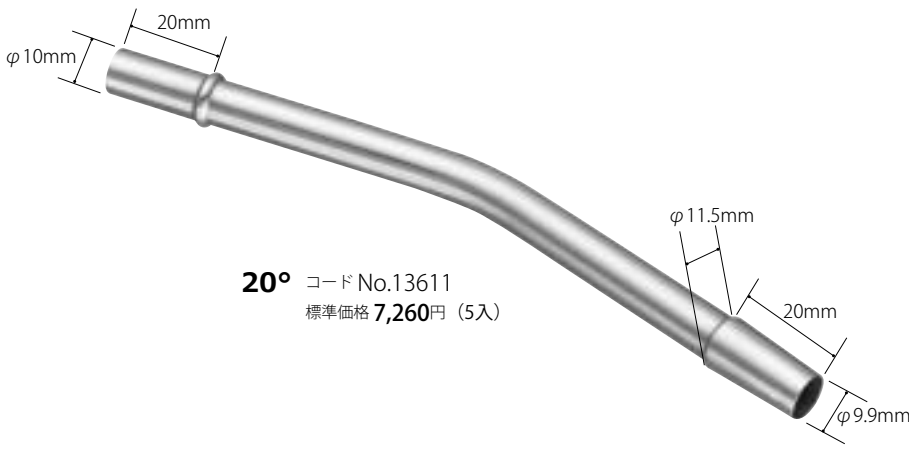

20° コード No.13611
標準価格 7,260円 (5入)



サイズ/180mm

医療機器承認番号 219008ZX00980000
一般名称 歯科用吸引管 販売名 バキュームチップ

別 売
クリーニングブラシL(φ12)
コード No.13653
標準価格 4,200円 (12入)




バキュームチップ用先端ゴム



1/1

- 内部にトラップが付いています。
- φ10mm、φ11mm両用となります。

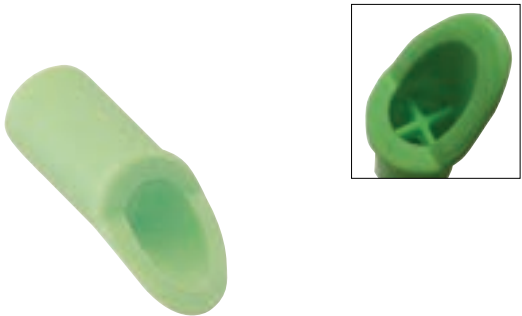

コード No.13613
標準価格 2,090円 (5入)

※材質 Si 耐熱温度260℃

バキュームチップアダプター



1/1

- φ11mmのバキュームチップをφ16mmに変換します。



コード No.13614
標準価格 3,200円


※材質 PTFE 耐熱温度260℃

ステンレスディッシュ

- 表面麻酔、消毒薬、エッチング液、歯面研磨剤の滴下に使用します。
- 即時重合薬盛や仮封剤の粉液タイプにも有効です。



ステンレストレー

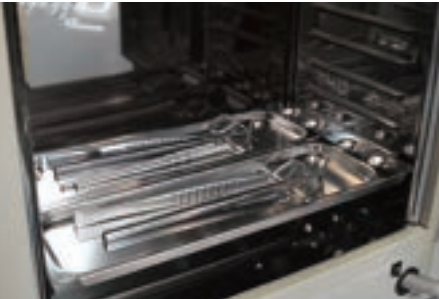

●キャビネットの一段に、2枚並べて収納できます。

基本セット

コード No.13991
標準価格 74,400円

セット内容	
治療ピンセット NC #18	10 本
ミラーハンドル 角型	10 本
ステンレストレー M	10 枚
ミラートップクリアー 2 4P	20 枚

- 開業に必須のピンセット・ミラー・トレーを特別パックにしました。



医療機器届出番号 1181X1000625D010
一般的名称 歯鏡 販売名 基本セット

