




製造販売元 **株式会社YDM**

〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006

問 合 先 デンタル事業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL: 03-3828-3161 FAX: 03-3827-8991
http://www.ydm.co.jp/ E-mail: ydm@ydm.co.jp

掲載製品の標準価格は、2025年5月21日現在のものです。標準価格に消費税等は含まれておりません。
製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがございます。

YDM オフィシャル SNS では様々な情報を発信しております。

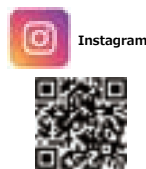

口腔内撮影 Photographic Instrument




口腔内撮影ミラー ガラス



(滅菌用保護袋付)

- 多層膜のチタンコーティングにより入射光の吸収がほとんどなく、明るい写真が撮れます。
- ガラス表面のチタンコーティングにより、キズが付きにくくなっています。
- 咬合面用は、日本人の幅広いアーチが納まる寸胴なデザインです。
- 軽量な為、片手での操作がしやすくなっています。

- ▶表面反射式
- ▶反射率 約98%
- ▶チタンコーティング

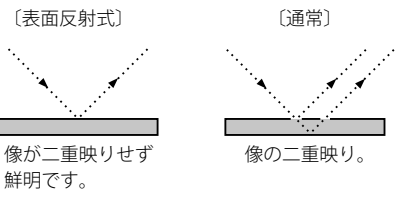

咬合面用 L

コード No.13282
標準価格 19,800円


咬合面用 M

コード No.13283
標準価格 19,800円

頬舌側用

コード No.13281
標準価格 19,800円

- ※厚さ 3.0mm
- ※耐熱温度 200℃
- ※ミラー面／片面（裏面にはYDMマークが入っています。）
- ※滅菌用保護袋 耐熱温度200℃

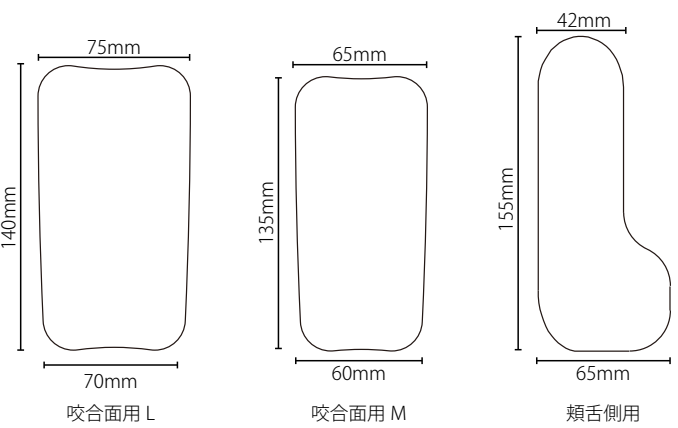

- 明るく鮮明に写ることによって色調や口腔内の状態をより正確に把握できます。



- 頬舌側用は把持部が広く、安定して把持、圧排できるデザインです。

医療機器届出番号 11B1X1000625D021
一般的名称 歯鏡 販売名 口腔内撮影ミラー ガラス



口腔内撮影ミラー



(滅菌用保護袋付)

- ステンレス製なので、破損の心配がありません。
- 1枚に2サイズのミラーがついているので、サイズ合せがスムーズです。（舌側用は1サイズです。）

- ▶ステンレス製
- ▶表面反射式

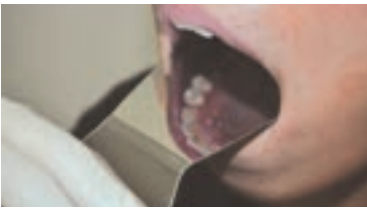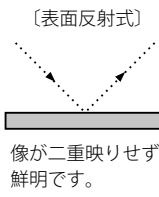

- 中間部が屈曲しているため、持ちやすく、また、持った手が撮影の邪魔になりません。



- ロジウムコーティングで傷がつきにくく、明るいミラーです。
- ▶ロジウムコーティング
- ▶反射率 約85%


コードNo.	品名	標準価格
13578	咬合面用 ワイド LL	32,000円
13576	咬合面用 ワイド L	24,900円
13577	咬合面用 ワイド S	24,900円
13571	咬合面用	24,900円
13572	舌側用	24,900円
13573	頬側用	24,900円

ST

- 使いやすさはそのまま、エコノミータイプです。
- ▶反射率 約65%

コードNo.	品名	標準価格
13266	ST 咬合面用 ワイド LL	10,800円
13264	ST 咬合面用 ワイド L	9,700円
13265	ST 咬合面用 ワイド S	9,700円
13261	ST 咬合面用	9,700円
13262	ST 舌側用	9,700円
13263	ST 頬側用	9,700円

- ※厚さ 1.2mm
- ※ミラー面／片面
- ※滅菌用保護袋 耐熱温度200℃

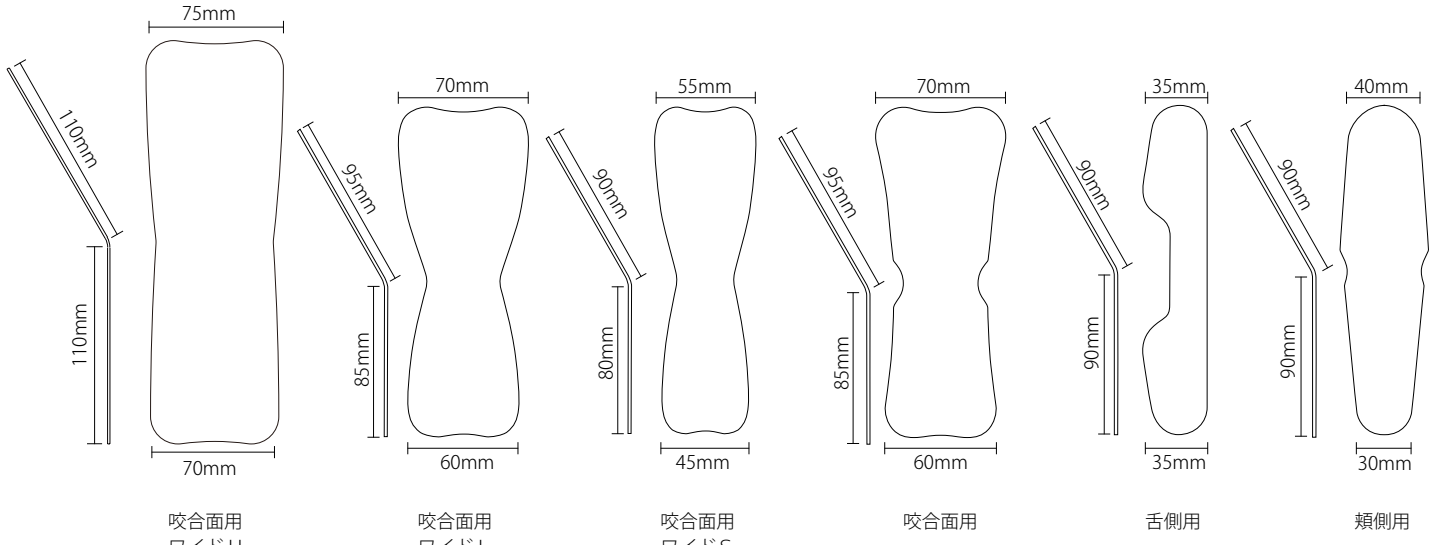

医療機器届出番号 11B1X1000625D004
一般的名称 歯鏡 販売名 口腔内撮影ミラー
ST 医療機器届出番号 11B1X1000625D014
一般的名称 歯鏡 販売名 口腔内撮影ミラー ST

高硬度ステンレス鋼を採用

●一般的なステンレス鋼に比べて硬度が高い為、傷がつきにくく、
ゆがみの少ないミラーです。
※お取扱い方法によっては傷がつかますのでご注意ください。

硬度比較（ビッカース硬度）

【YDM 口腔内撮影ミラー】 高硬度ステンレス鋼 + ロジウムコーティング	約 533HV	【一般的なロジウムコーティングステンレス製ミラー】 一般的なステンレス鋼 + ロジウムコーティング	約 240HV
【YDM 口腔内撮影ミラー ST・SE】 高硬度ステンレス鋼	約 369HV	【一般的なステンレス製ミラー】 一般的なステンレス鋼	約 198HV

口腔内撮影ミラー SE



- (滅菌用保護袋付)
- ステンレス製なので、破損の心配がありません。
 - 表面反射式のため、像が二重映りせず、鮮明です。

- ▶ステンレス製
- ▶反射率 約65%
- ▶表面反射式




咬合面用LL
コード No.13274
標準価格 8,800円

咬合面用L
コード No.13272
標準価格 8,000円

咬合面用M
コード No.13273
標準価格 8,000円

頬舌側用
コード No.13271
標準価格 8,000円

※厚さ 1.2mm
※ミラー面／片面
※滅菌用保護袋 耐熱温度200℃

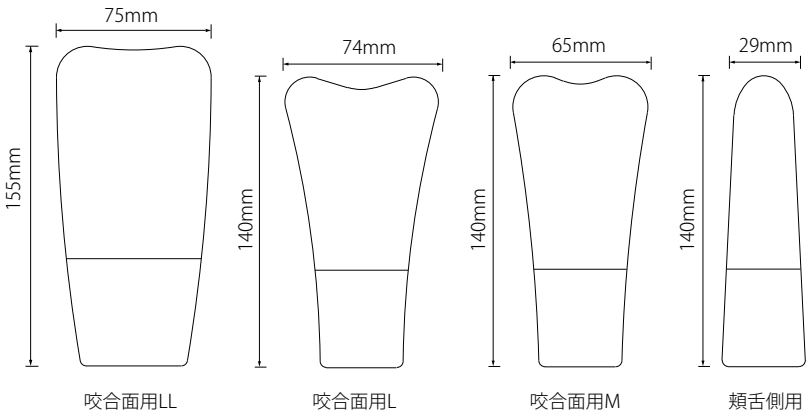

医療機器届出番号 11B1X1000625D015
一般的名称 歯鏡 販売名 口腔内撮影ミラー SE

コントラスター



- 被写体の背景を黒くすることにより、
歯牙の形態や色調がハッキリと確認できます。
- シェード合わせや充填後の確認の精度が上がります。




前歯用L
コード No.13641
標準価格 4,400円

前歯用S
コード No.13643
標準価格 4,400円

臼歯用
コード No.13642
標準価格 4,400円

	コントラスター使用時	通常撮影時
前歯上顎		
臼歯下顎		

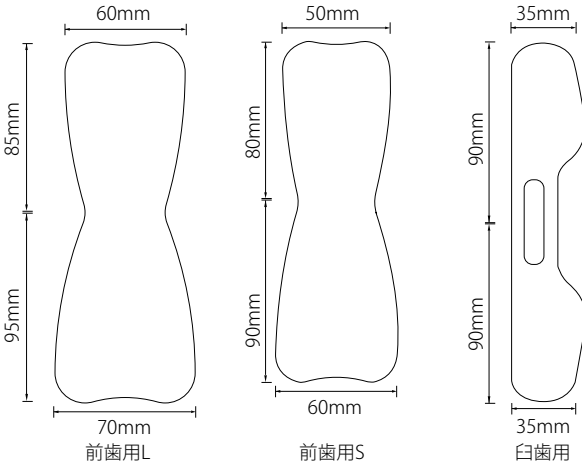

※黒色塗装部／材質 フッ素樹脂 耐熱温度200℃

医療機器届出番号 11B1X1000625D005
一般的名称 歯鏡 販売名 コントラスター

口角鉤



1/1



A コード No.22731
標準価格 3,500円 (2入)



B コード No.22732
標準価格 3,500円 (2入)



C コード No.22733
標準価格 3,500円 (2入)
口唇排除用フック



D コード No.22734
標準価格 3,500円 (2入)
幼児・小学生低学年向き

〔口角鉤D〕



〔通常の口角鉤〕



- 成人の咬合面撮影における口唇鉤としても使用できます。
- 口角鉤が口唇から口角上部（下顎撮影時は下部）までの範囲で装着されます。そのため、口角鉤がミラー挿入の妨げになったり、ミラーに映り込むことなく、口唇と頬粘膜をしっかり排除できます。

※材質 TPX 耐熱温度160℃

医療機器届出番号 11B1X1000650D204
一般的名称 歯科用開口器 販売名 口角鉤

口角鉤 ピジョン



1/1

- 深いU字形状で深側部まで圧排できるため、ミラーを使用しない側方部撮影に有効です。




M コード No.22739
標準価格 6,500円




S コード No.22740
標準価格 6,500円




SS コード No.22741
標準価格 6,500円

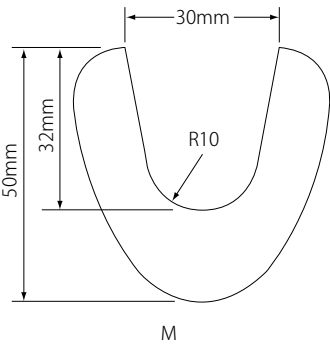

M

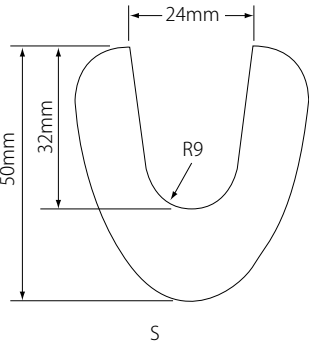

S

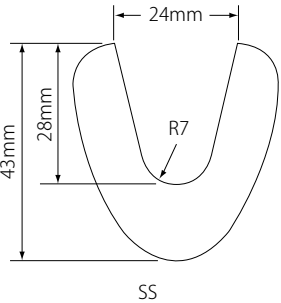

SS



※材質 TPX 耐熱温度160℃

医療機器届出番号 11B1X1000650D204
一般的名称 歯科用開口器 販売名 口角鉤

口角鉤 アングルワイダー




●補助者なしで口角を排除し、視野を確保できます。

1/1




コードNo.22745
標準価格 10,890円 (2入)
※カラー 透明

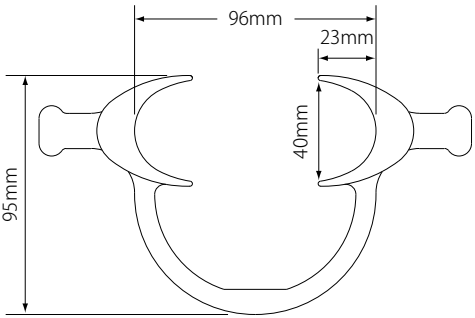

●口腔ケアにも便利です。

●素材が柔らかく適度なしなりがあるため、装着時の負担が軽減されます。

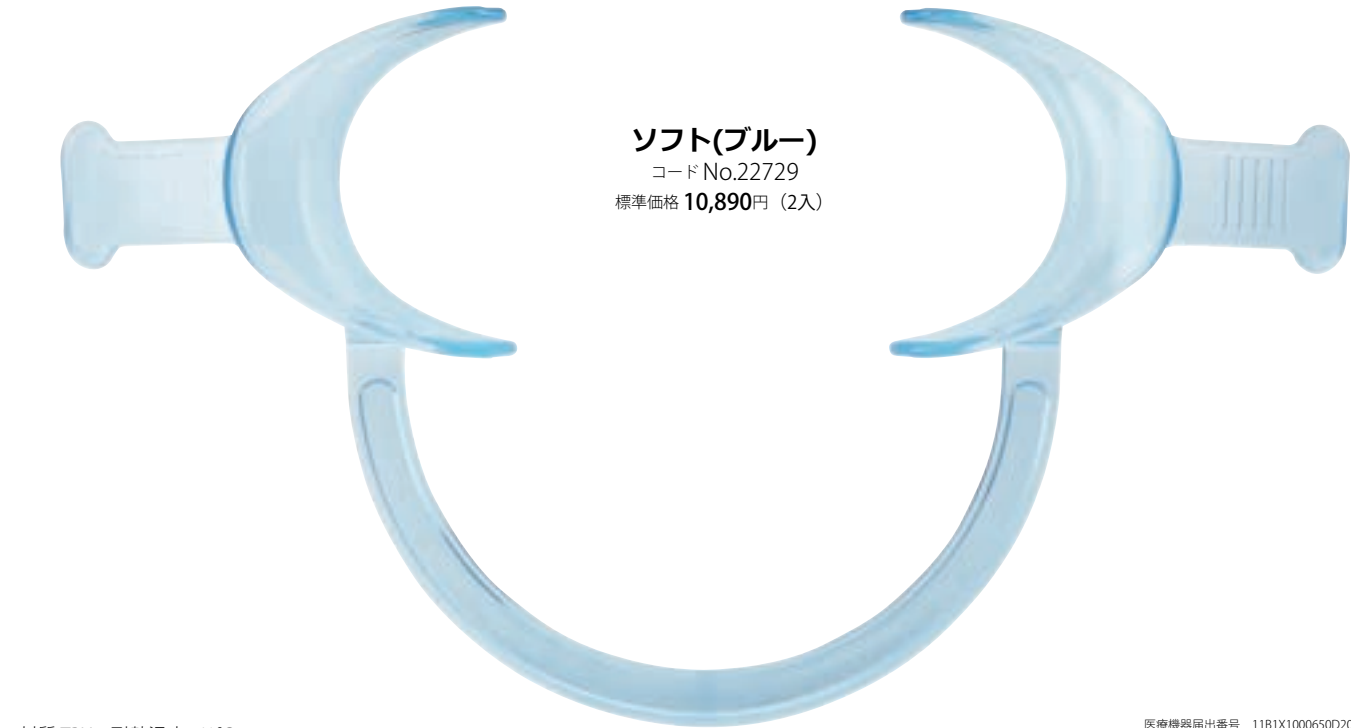

ソフト(ブルー)
コードNo.22729
標準価格 10,890円 (2入)

※材質 TPX 耐熱温度160℃

医療機器届出番号 11B1X1000650D204
一般的名称 歯科用開口器 販売名 口角鉤

口角鉤 アングルワイダー ワイド (ピンク)




●補助者なしで口角を排除し視野を確保できます。

1/1



コードNo.22727
標準価格 10,890円 (2入)

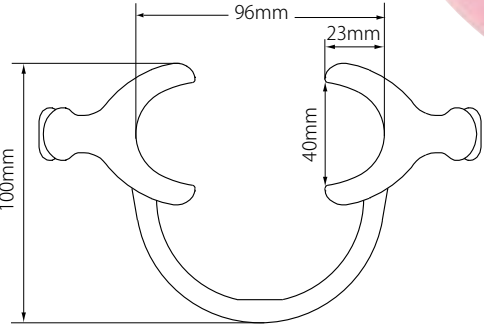

●口角を排除すると同時に、内側のウイングで頬粘膜を圧排します。




●ウイングにより口腔前庭が拡がり、矯正ブラケットのボンディング、口腔ケア、レジン充填等の処置がしやすくなります。

写真提供：渋澤龍之先生（渋澤矯正歯科 院長）

●補助者なしで口角を排除し視野を確保できます。小児の口腔内撮影、口腔ケア、矯正治療時に便利です。
●幼児から小学生低学年向けのサイズです。



小児用
コードNo.22728
標準価格 8,800円 (2入)

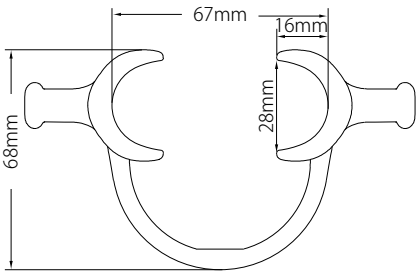

※材質 TPX 耐熱温度160℃

医療機器届出番号 11B1X1000650D204
一般的名称 歯科用開口器 販売名 口角鉤

口角鉤 アングルワイダー ダブルソフト



- 補助なしで口角を排除し、視野を確保できます。
- 素材が柔らかいため、装着時の負担が軽減されます。
- ウィングを引っ張り、視野を広げることが可能です。

1/1




口角鉤 ダブルワイダー



- 口角・口唇をバランス良く圧排し、舌固定もできます。
- 審美指導・ホワイトニング時・矯正治療のブラケット装着時等にも有効です。

3/5

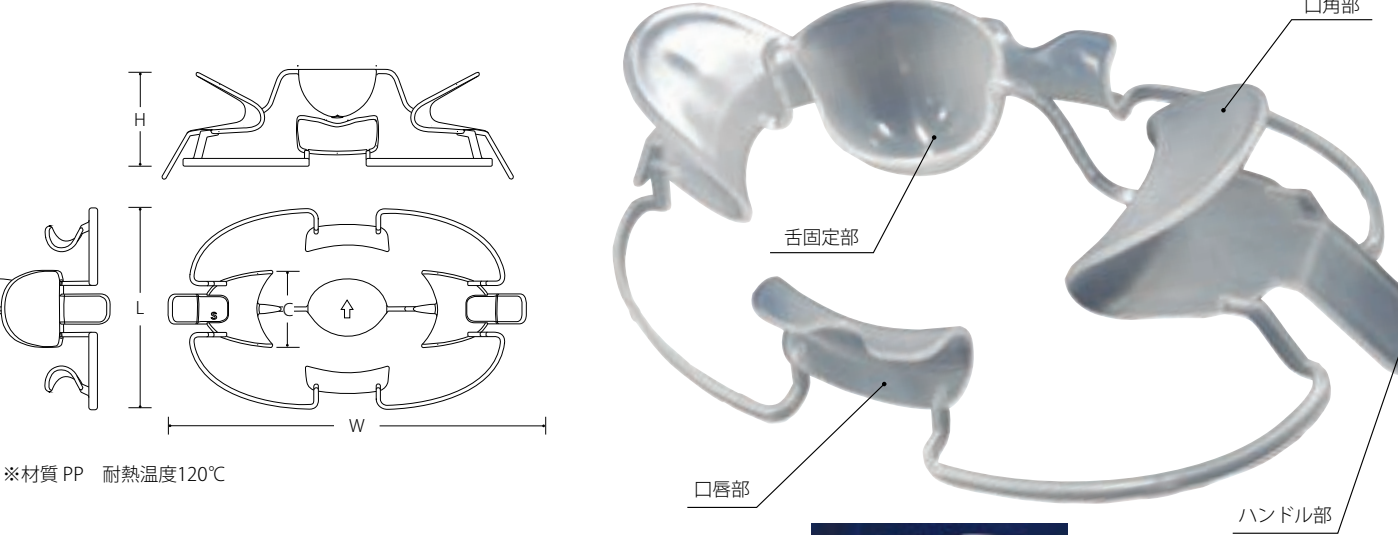

コードNo.	品名	種類	サイズ (mm)				標準価格	入数
			W	L	H	C		
22750	L	ラージ	171	96	54.5	38	5,400円	2入
22749	S	スタンダード	161	90	50.5	35	5,400円	
22725	SS	ジュニア	157	80	42	25	5,400円	



●舌固定部は、切断して使用することもできます。



①舌固定部の矢印を上向きにし、ハンドル部をひねり、左右の口角に装着します。


②上下の口唇に装着します。

医療機器届出番号 11B1X1000650D205
一般的名称 歯科用開口器 販売名 口角鉤 ダブルワイダー

ディープリトラクター SU型



- 大白歯部の頬粘膜までしっかり排除し、咬合面撮影時に有効です。
- デジタル印象採得装置（口腔内スキャナ）の使用時に有効です。

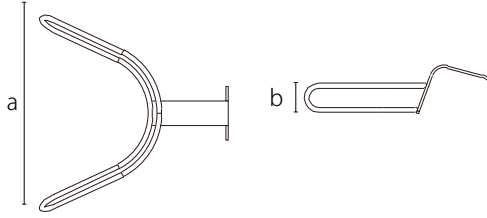

コードNo.	品名	標準価格	サイズ (mm)	
			a	b
22723	大人用	6,800円	80	12
22724	小児用	6,800円	67	9



●歯列弓状の圧排部が臼歯部の頬粘膜まで届いてしっかり排除できます。




●リトラクターのハンドルは、撮影の邪魔にならず、患者さんが把持しやすい設計です。

医療機器届出番号 11B1X1000650D104
一般的名称 歯科用開口器 販売名 ディープリトラクター SU型

ディープリトラクター 片顎用

- デジタル印象採得装置（口腔内スキャナ）の使用時に有効です。
- 頬粘膜をしっかり排除し、形成時にも使用が可能です。

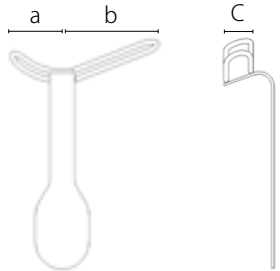

サイズ (mm)		
a	b	c
21	40	12

#1
コードNo.22721
標準価格 **6,800円**
(上顎右側・下顎左側用)

#2
コードNo.22722
標準価格 **6,800円**
(上顎左側・下顎右側用)

スキャニング時



形成時



写真提供：津田 宏尚 先生
(インプラントセンター津田デンタルクリニック院長)

医療機器届出番号 11B1X1000650D105
一般的名称 歯科用開口器 販売名 ディープリトラクター