




製造販売元 **株式会社YDM**
〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006
問 合 先 デンタル事業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL: 03-3828-3161 FAX: 03-3827-8991
http://www.ydm.co.jp/ E-mail: ydm@ydm.co.jp

掲載製品の標準価格は、2025年5月21日現在のものです。標準価格に消費税等は含まれておりません。
製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがございます。

YDM オフィシャル SNS では様々な情報を発信しております。

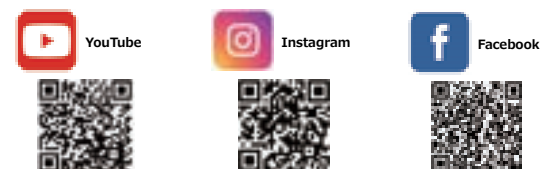

保存
Conservative Treatment




エクスケーター CDR タイプ2




●MIを追求したう蝕象牙質除去器です。


1/1

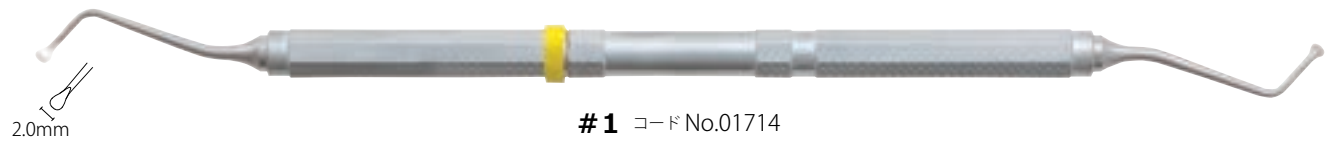

#1 コード No.01714
標準価格 5,940円

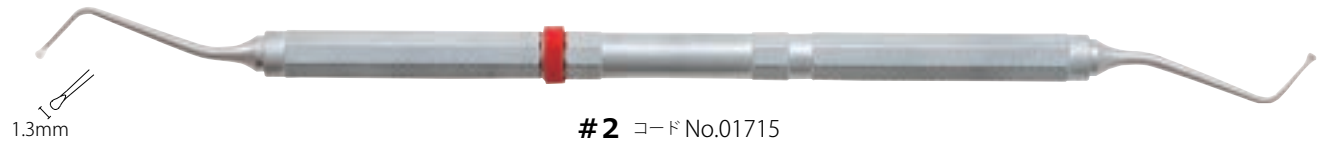

#2 コード No.01715
標準価格 5,940円

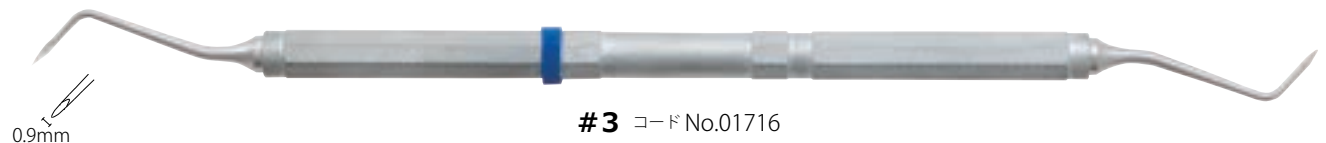

#3 コード No.01716
標準価格 5,940円

Point 1
効率的
#1・#2
刃付け 300°
刃付け範囲が広いので、効率良くう蝕象牙質を除去できます。

Point 2
清潔
#1・#2
洋ナシ型
首もとがなだらかな形状なので、一拭きで確実に削片が除去でき、清潔です。


Point 3
確実除去
#3
象牙質、エナメル質、う蝕、破折、エナメル質
エナメル-象牙質に残るう蝕象牙質も、エナメル質を破折することなく確実に除去できます。

『スプーンエクスケーターに過剰切削の危険性はない』その理由は・・・

スプーンエクスケーターを使用すると感染う蝕象牙質のみが選択的に削除される。

- 歯冠部健全象牙質のヌープ硬さ
全体として 約 62 歯髄直近部では 約 42
- 抜去歯のう蝕象牙質を鋭利なスプーンエクスケーターで削除した場合の 残存象牙質のヌープ硬さ 17 ~ 24
=スプーンエクスケーターの切削限界

参考文献
1) 清水明彦：世界初のう蝕象牙質の硬さ測定システム「カリオテスター」の紹介とその応用について。日歯理工誌、Vol30:29-32,2011。
2) 清水明彦、鳥井康弘：スプーンエクスケーターに関する研究 第2報 スプーンエクスケーターの刃先のシャープネスと削削能力の関係。日歯保誌、28:690-694,1985。
3) 鳥井康弘：う蝕象牙質の削除と残存感染象牙質の処置に関する研究。阪大歯学誌、31:118-136,1986。
4) 柴谷貴子、菱田悦、清水明彦：修復物下軟化象牙質と未修復軟化象牙質の硬さの比較。日歯保誌、24:916-924,1981。

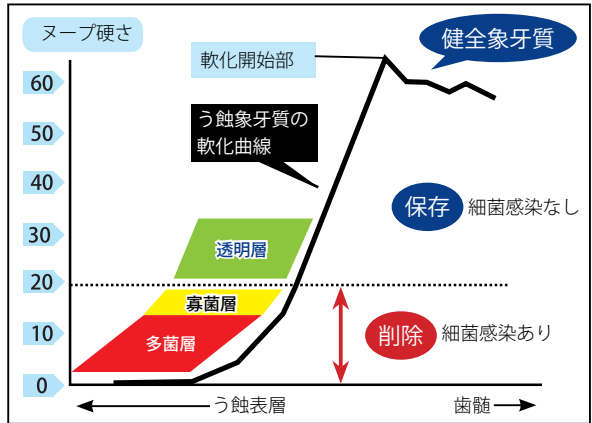

う蝕象牙質の軟化状態を示す模式図
(ヌープ硬さ20の根拠は、参考文献1)をご参照ください。)

※カラーリング／材質 Si 耐熱温度260℃

医療機器届出番号 1181X1000662D309
一般的名称 歯科用エクスケーター 販売名 エクスケーター CDR

エクスケーター ラウンド タイプ2



1/1



直 #1 コード No.01605 標準価格 5,450円
曲 #1 コード No.01705 標準価格 5,450円



直 #2 コード No.01606 標準価格 5,450円
曲 #2 コード No.01706 標準価格 5,450円



直 #3 コード No.01607 標準価格 5,450円
曲 #3 コード No.01707 標準価格 5,450円



直 #4L コード No.01608 標準価格 5,450円
曲 #4L コード No.01708 標準価格 5,450円




- 極小のサイズのスプーンで、微細な窩洞形成に有効です。
- シャングが長いので、マイクロスコープ下で視野の妨げになりません。
- 届きにくい臼歯部遠心面にも有効です。



写真提供：吉岡 隆知 先生 (吉岡デンタルオフィス院長 東京医科歯科大学 臨床教授)
写真提供：関口 亮 先生 (関口デンタルオフィス 院長)

※カラーリング／材質 Si 耐熱温度260℃

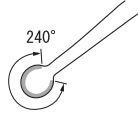

先端の円に沿って刃がついているので、窩洞形成・軟化象牙質の除去等を効率よく行うことができます。

直 窩壁・窩底 平面の窩洞形成

曲 アンダーカット部 狭い切削開口部付近 隅角部の作業時

医療機器届出番号 1181X1000662D301
一般的名称 歯科用エクスケーター 販売名 エクスケーター

Diamond Like Carbon

DLC

「強さ」と「滑らかさ」は新次元へ

DLC※コーティングの採用で群を抜く丈夫さと、滑らかさを確保。
これまでにないレジン離れの良さと、長く愛用いただける耐久性で選ばれています。

※DLC：ダイヤモンド ライク カーボン

Point 1 非晶質構造ならでの滑らかな表面は
レジン離れが良く、操作性が一段と向上

Point 2 ステンレス鋼の2～4.5倍にあたる
3000～4500HVの硬度を達成し、
長期にわたり本来のパフォーマンスを維持

Point 3 適度なしなりも兼ね備えた長寿命を実現
インスツルメントのコスト削減に寄与

レジン充填形成器 DLC

135℃


▶ダイヤモンドライクカーボンコーティング

1/1

●ヘラは薄く、適度にしなりがあるため、形成がしやすく、歯間部や歯肉溝へスムーズに挿入できます。




#1 コード No.03381
標準価格 6,800円
充填

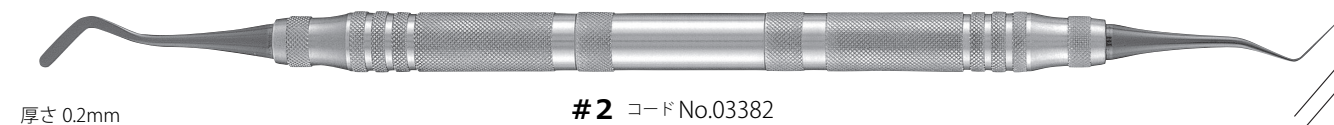

#2 コード No.03382
標準価格 6,800円
充填・形成




#3 コード No.03383
標準価格 6,800円
臼歯部近遠心面の充填・形成

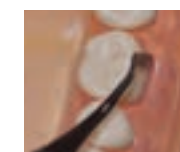

●頸部がオフセットで、
臼歯部遠心面に届き
やすい角度です。



#4 コード No.03384
標準価格 6,800円
前歯部唇側面の充填・形成

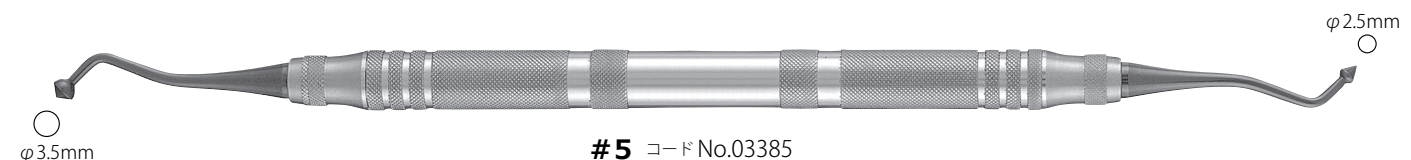

#5 コード No.03385
標準価格 6,800円
小窩裂溝・咬合面の形成



#6 コード No.03386
標準価格 6,800円
咬合面の充填


レジン充填形成器 TMDU型 タイプ2



▶ダイヤモンドライク カーボン コーティング

1/1

- DLCは高硬度でキズがつきにくく、表面が平滑なコーティングのため、レジン離れがよく、操作性に優れています。
- ヘラは薄く、適度にしなりがあるため、形成がしやすく、歯間部や歯肉溝へスムーズに挿入できます。

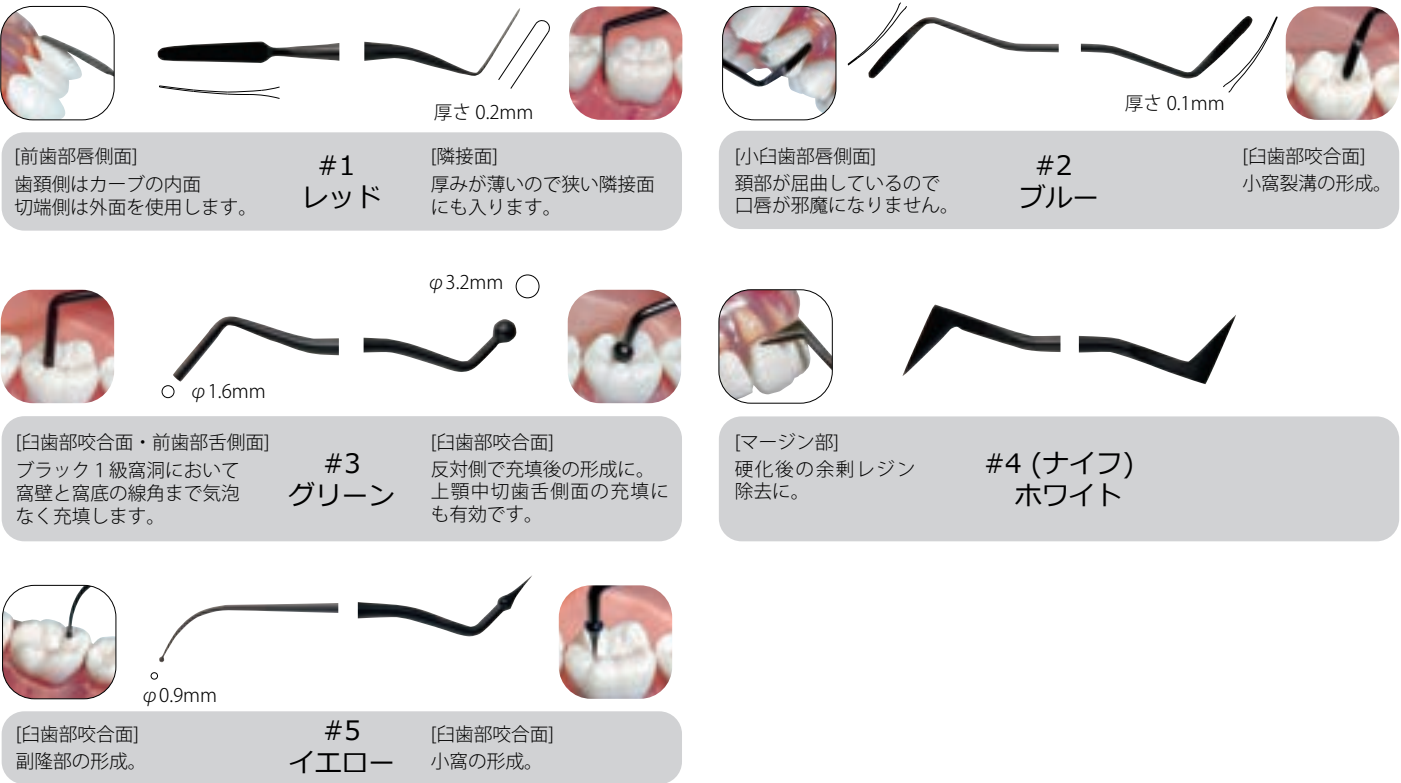

※カラーリング／材質 Si 耐熱温度 260℃

医療機器届出番号 1181X1000665D615
一般的名称 歯科用充填器 販売名 レジン充填形成器

レジン充填形成器 TMDU型 タイプ3



▶ダイヤモンドライク カーボン コーティング

1/1

- DLCは高硬度でキズがつきにくく、表面が平滑なコーティングのため、レジン離れがよく、操作性に優れています。
- ヘラは薄く、適度にしなりがあるため、形成がしやすく、歯間部や歯肉溝へスムーズに挿入できます。



写真提供：大槻 昌幸 先生（東京医科歯科大学 口腔制御学 准教授）

医療機器届出番号 1181X1000665D615
一般的名称 歯科用充填器 販売名 レジン充填形成器

レジン充填形成器 DLC ポイント式



- ハンドルとポイントの組合せが自由に選択できます。
 - 古くなったポイントだけを交換し、ハンドルを繰り返し使用できるので経済的です。
- ※滅菌・消毒の際は、サビの発生を防ぐためポイントを外して下さい。

ポイント式 分解図

1/1

ハンドル片頭

P-A

コード No.10201

標準価格 3,200円

サイズ／φ8.0mm

P-F

コード No.10205

標準価格 3,200円

サイズ／φ6.0mm

ハンドル両頭

P-B

コード No.10202

標準価格 4,000円

サイズ／φ8.0mm

P-C

コード No.10203

標準価格 4,000円

サイズ／φ6.0mm

P-A/ハンドル

医療機器届出番号 11B1X1000634D003

一般的名称 ナイフハンドル

販売名 P-Aハンドル

P-F/ハンドル

医療機器届出番号 11B1X1000634D007

一般的名称 ナイフハンドル

販売名 P-Fハンドル

P-B/ハンドル

医療機器届出番号 11B1X1000634D004

一般的名称 ナイフハンドル

販売名 P-Bハンドル

P-C/ハンドル

医療機器届出番号 11B1X1000634D005

一般的名称 ナイフハンドル

販売名 P-Cハンドル

2/3

ポイント

▶ダイヤモンドライク カーボン コーティング



#2A コードNo.23425
標準価格 6,800円 (3入)



#2B コードNo.23426
標準価格 6,800円 (3入)

※厚さ 0.2mm

医療機器届出番号 11B1X1000665D621
一般的名称 歯科用充填器 販売名 レジン充填形成器DLC P式

コンポジット充填器 ポイント式



1/1

ポイント

▶テフロン コーティング



#CP3 コードNo.03333
標準価格 5,120円 (3入)



#CP4 コードNo.03334
標準価格 5,120円 (3入)

※厚さ 0.2mm

※材質 テフロン塗装 耐熱温度200℃

医療機器届出番号 11B1X1000665D610
一般的名称 歯科用充填器 販売名 コンポジット充填器 ポイント式

コンポジットシリンジ タイプ2



1/1



本体



ノズル L
(プラグの色/ブルー)


L コード No.13251
標準価格 16,060円 (ノズルL 100入)



ノズル S
(プラグの色/グリーン)

S コード No.13252
標準価格 16,060円 (ノズルS100入)

【使用方法】

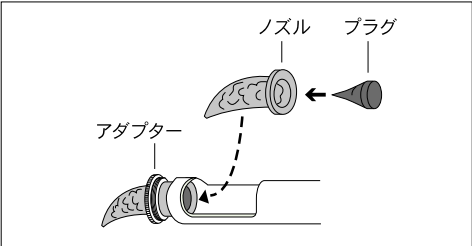

- 必要量のコンポジットレジンをつめプラグをノズルの中にはめこんだ後、シリンジの中へ挿入して使用します。

医療機器届出番号 11B1X1000665D616
一般的名称 歯科用充填器 販売名 コンポジットシリンジ

単品

コードNo.	品名	標準価格
13255	本体L	10,670円
13256	本体S	10,670円
90370	アダプターL	730円
90371	アダプターS	730円

コードNo.	品名	標準価格	入数
13188	ノズルL	5,800円	100入
13190	ノズルS	5,800円	100入
13193	ノズルL	29,000円	500入
13194	ノズルS	29,000円	500入


※黒色部／材質 PPS 耐熱温度260℃



練成充填器



1/1

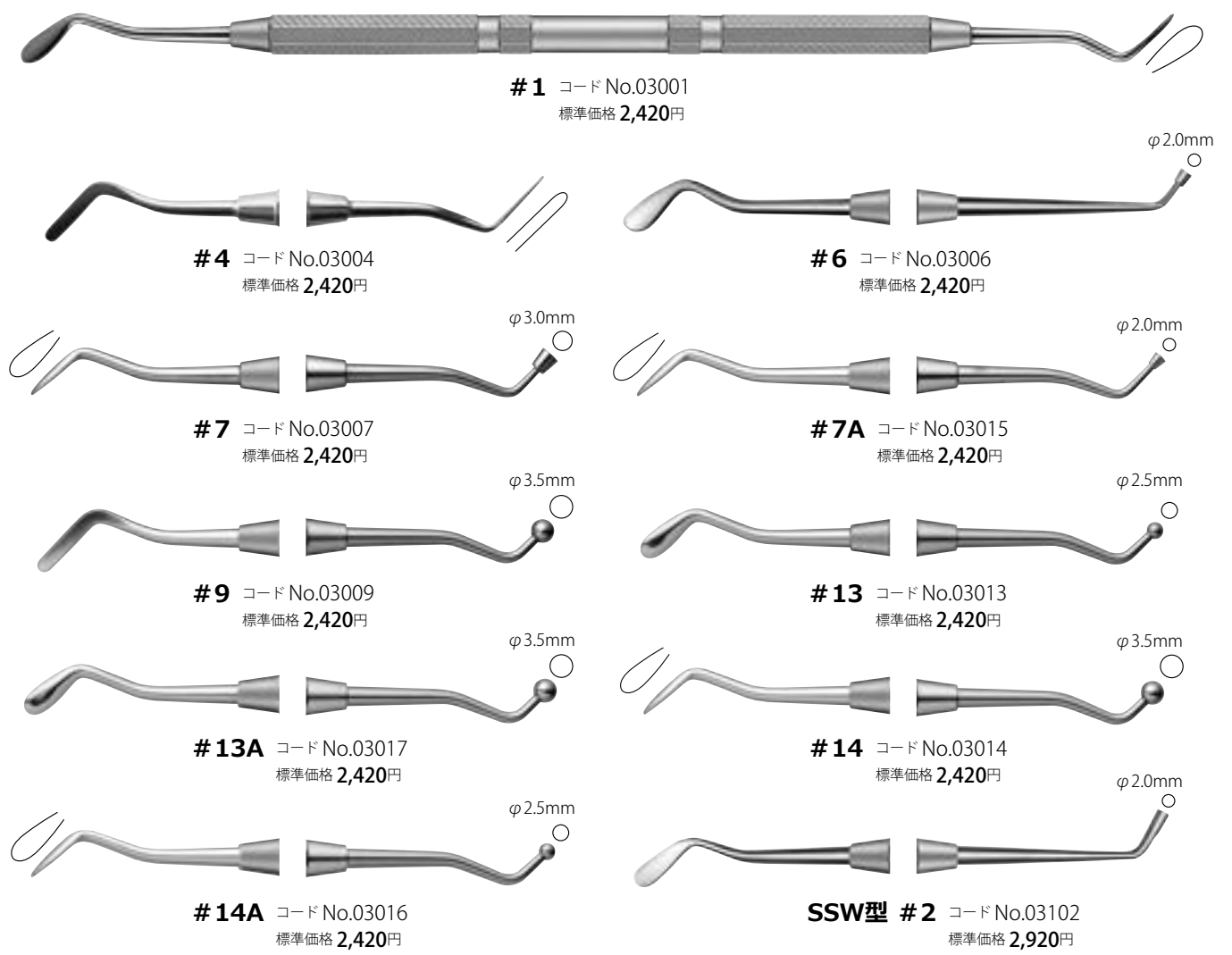


医療機器届出番号 11B1X1000665D617
一般的名称 歯科用充填器 販売名 練成充填器

隣接面充填器



1/1

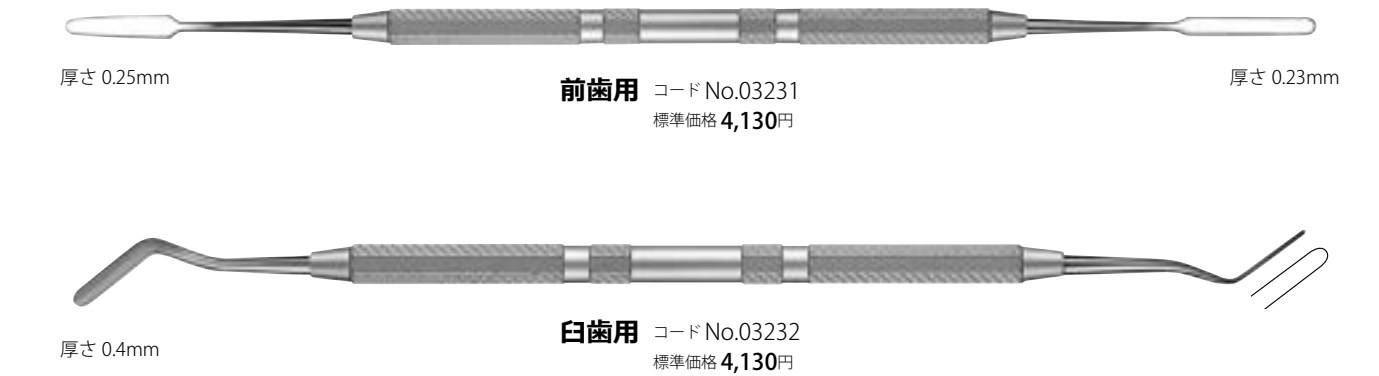

医療機器届出番号 11B1X1000665D602
一般的名称 歯科用充填器 販売名 隣接面充填器

シリケート充填器



1/1




医療機器届出番号 11B1X1000665D603
一般的名称 歯科用充填器 販売名 シリケート充填器

裏層器 F-B型



1/1

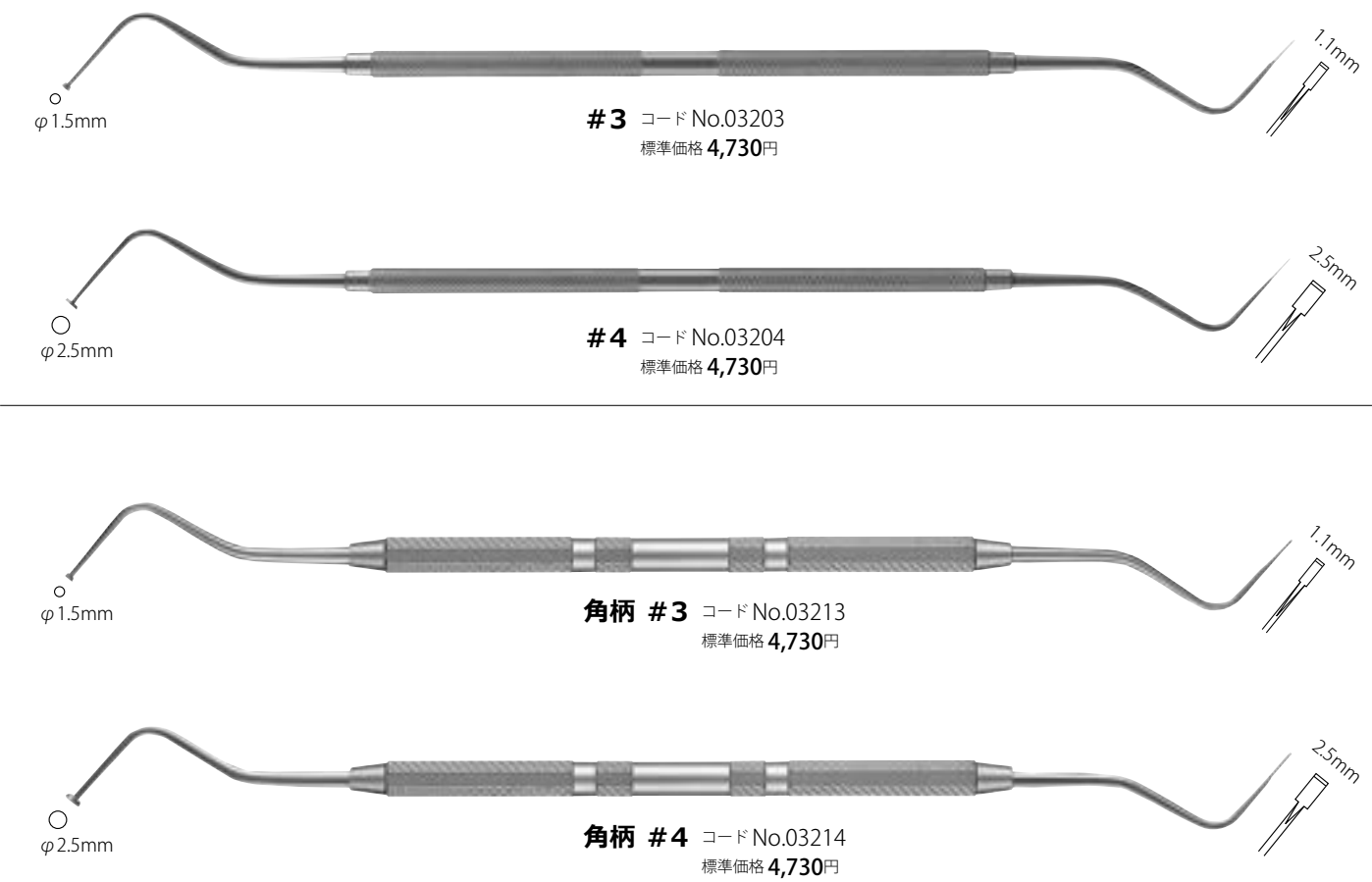

医療機器届出番号 11B1X1000665D601
一般的名称 歯科用充填器 販売名 裏層器

ボールポイントアプリケーター



1/1



医療機器届出番号 11B1X1000665D604
一般的名称 歯科用充填器 販売名 ボールポイントアプリケーター

アマルガムカーバー



1/1



丸柄 コード No.07100
標準価格 4,800円

医療機器届出番号 11B1X1000665D402
一般的名称 歯科用アマルガム形成器 販売名 アマルガムカーバー

セパレーター




1/1




〔臨床動画〕



アイボリー型 コード No.13161
標準価格 6,800円
前歯用

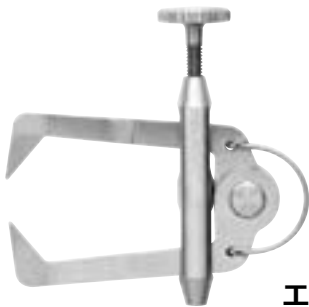

エリオット型 コード No.13162
標準価格 6,800円
臼歯用

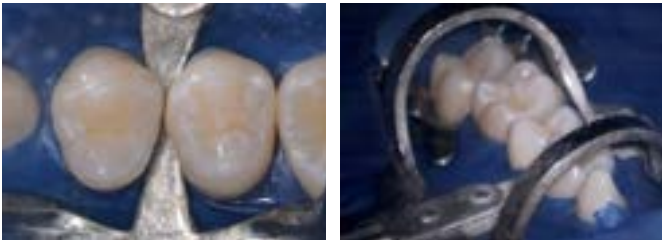

写真提供：木南 意澄 先生（昭和歯科・矯正歯科 院長）


医療機器届出番号 11B1X1000652D001
一般的名称 歯間分離器 販売名 セパレーター

コンタクトプロテクターセット




1/1

●歯牙切削時、隣在歯を保護します。

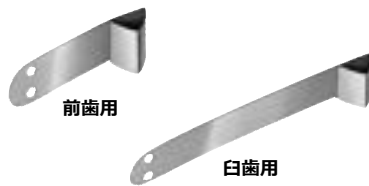

前歯用
白歯用
コード No.13175
標準価格 5,200円（前歯用・白歯用 各10枚入）

※厚さ50μm
※前歯用・臼歯用ともに単品の販売はございません。

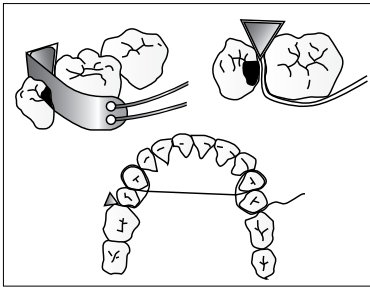


●穴にフロスを通して使用します。

マトリックスリテーナーセット




1/1

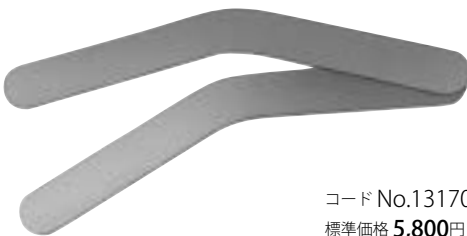

コード No.13170
標準価格 5,800円（バンド10枚入）

※バンド厚さ／30μm
※バンド長さ／62mm

〔装着方法〕

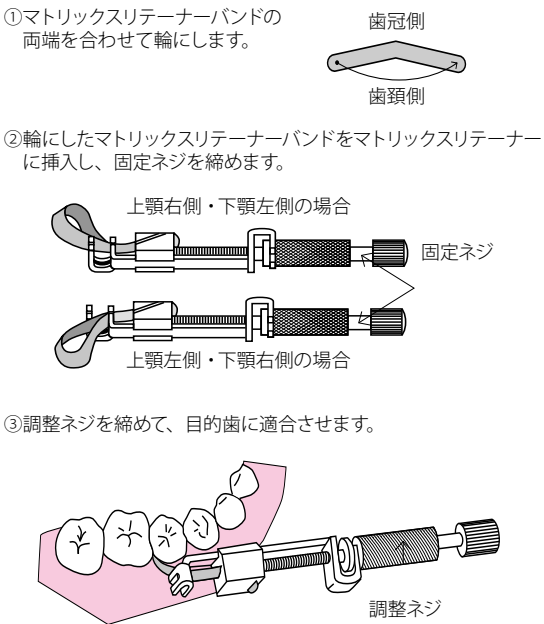


単 品

コードNo.	品名	標準価格	入数
13171	マトリックスリテーナー 本体	4,800円	1入
13172	マトリックスリテーナー バンド	1,000円	10枚入


マトリックスリテーナー セット	医療機器届出番号 11B1X1000665D102 一般的名称 歯科用マトリックスリテーナ	販売名 マトリックスリテーナーセット
マトリックスリテーナー 本体	医療機器届出番号 11B1X1000665D101 一般的名称 歯科用マトリックスリテーナ	販売名 マトリックスリテーナー
マトリックスリテーナーバンド10枚	医療機器届出番号 11B1X1000665D201 一般的名称 歯科用マトリックスバンド	販売名 マトリックスリテーナー バンド

ラバーダムクランプ

●#12A・#13Aは部分萌出歯にも装着できるよう、把握部をギザ付にし、左右の高さを段違いにしています。
▶マット仕上げ

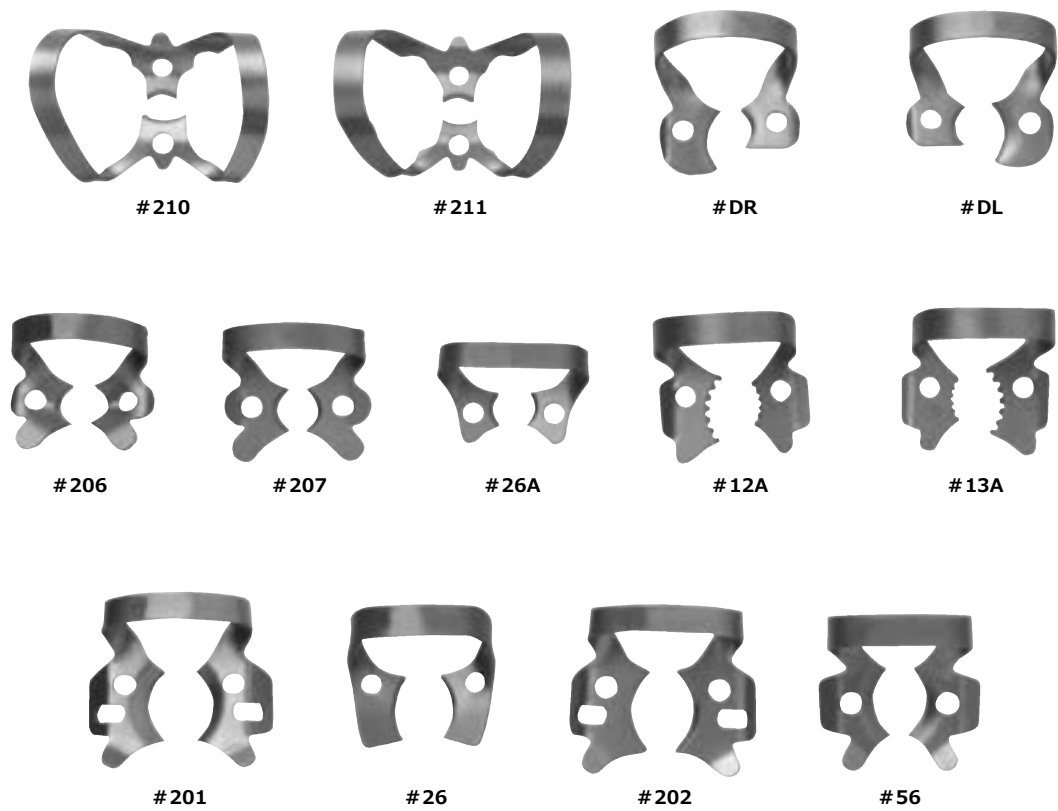

コードNo.	品名	反り	標準価格
08510	ラバーダムクランプ #210 (前歯用)	②	3,000円
08511	ラバーダムクランプ #211 (前歯用)	②	3,000円
08560	ラバーダムクランプ #DR (下顎右側第一乳臼歯用)	①	3,000円
08561	ラバーダムクランプ #DL (下顎左側第一乳臼歯用)	①	3,000円
08506	ラバーダムクランプ #206 (小臼歯用)	①	3,000円
08507	ラバーダムクランプ #207 (小臼歯用)	②	3,000円
08527	ラバーダムクランプ #26A (小臼歯・乳前歯用)	②	3,000円
08512	ラバーダムクランプ #12A (下顎大白歯・智歯用)	②	3,000円
08513	ラバーダムクランプ #13A (下顎大白歯・智歯用)	②	3,000円
08501	ラバーダムクランプ #201 (上顎大白歯用)	①	3,000円
08526	ラバーダムクランプ #26 (上顎大白歯・乳臼歯用)	①	3,000円
08502	ラバーダムクランプ #202 (下顎大白歯用)	②	3,000円
08556	ラバーダムクランプ #56 (下顎大白歯用)	①	3,000円

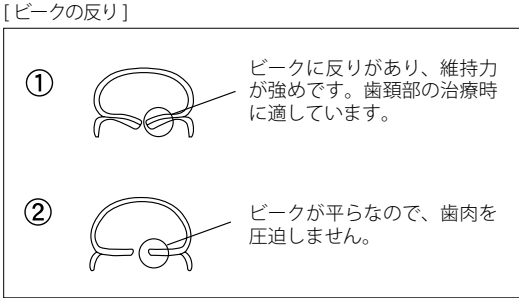

医療機器届出番号 11B1X1000667D001
一般的名称 歯科用ラバーダムクランプ
販売名 ラバーダムクランプ

クランプボード




コード No.08258
標準価格 5,200円

サイズ／W132×D87mm




ラバーダムパンチ タイプ2

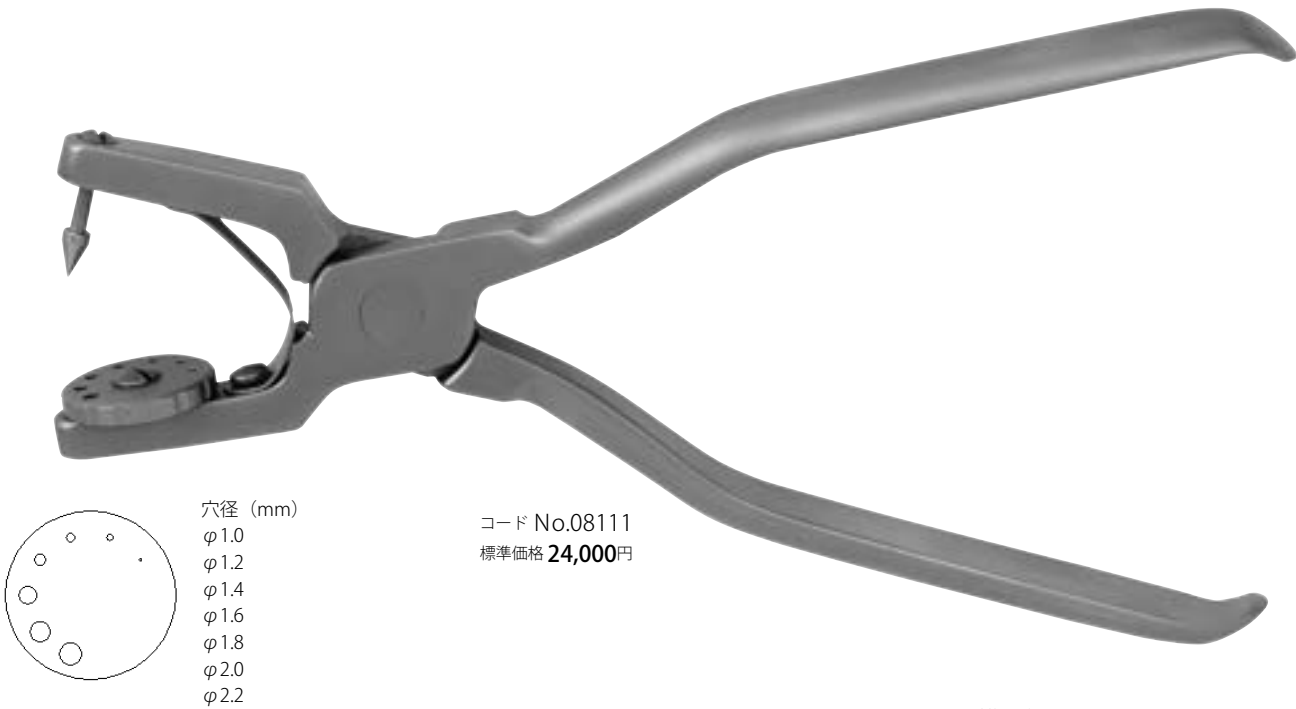


コード No.08111
標準価格 24,000円

医療機器届出番号 11B1X1000667D301
一般的名称 歯科用ラバーダムパンチ
販売名 ラバーダムパンチ

クランプ鉗子

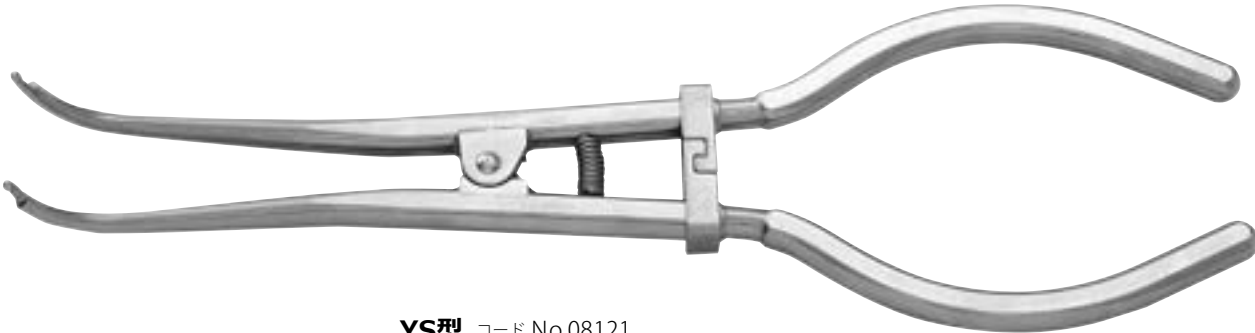

YS型 コード No.08121
標準価格 24,000円

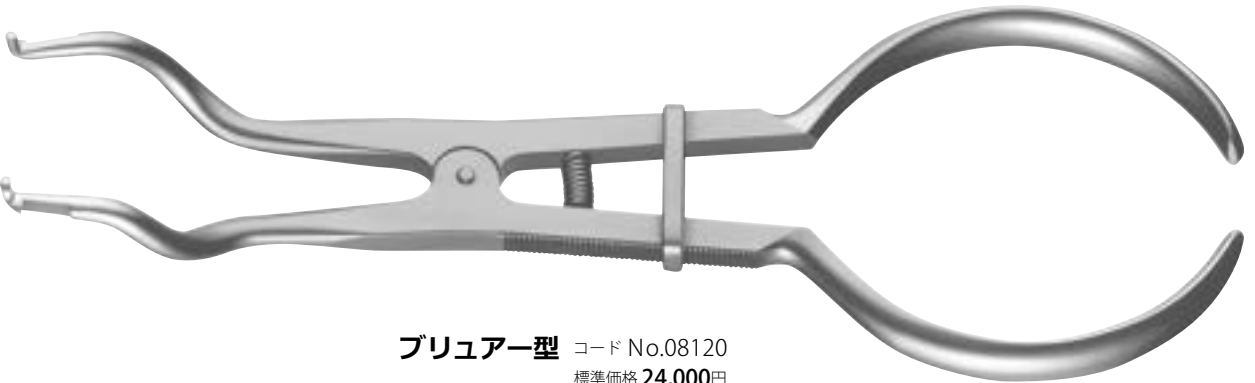

ブリュアー型 コード No.08120
標準価格 24,000円

医療機器届出番号 11B1X1000667D201
一般的名称 歯科用ラバーダムクランプ鉗子
販売名 クランプ鉗子

ヤングフレーム



1/2



大人用
コード No.08101
標準価格 2,000円

サイズ／W98×D90mm



小児用
コード No.08102
標準価格 2,000円

サイズ／W89×D70mm

医療機器届出番号 11B1X1000667D101
一般的名称 歯科用ラバーダムフレーム 販売名 ヤングフレーム

ラバーダムキット タイプ2



1/4


コード No.08591
標準価格 111,000円

セット内容

ラバーダムクランプ# 26	ラバーダムクランプ# DR
ラバーダムクランプ# 201	ラバーダムクランプ# DL
ラバーダムクランプ# 56	ラバーダムクランプ# 12A
ラバーダムクランプ# 202	ラバーダムクランプ# 13A
ラバーダムクランプ# 206	クランプボード
ラバーダムクランプ# 207	ラバーダムパンチ タイプ2
ラバーダムクランプ# 26A	クランプ鉗子 YS 型
ラバーダムクランプ# 210	ヤングフレーム 大人用
ラバーダムクランプ# 211	滅菌ケース ラバーダムキット タイプ2 用

単品

滅菌ケース ラバーダムキット タイプ2 用
コード No.24052
標準価格 17,000円

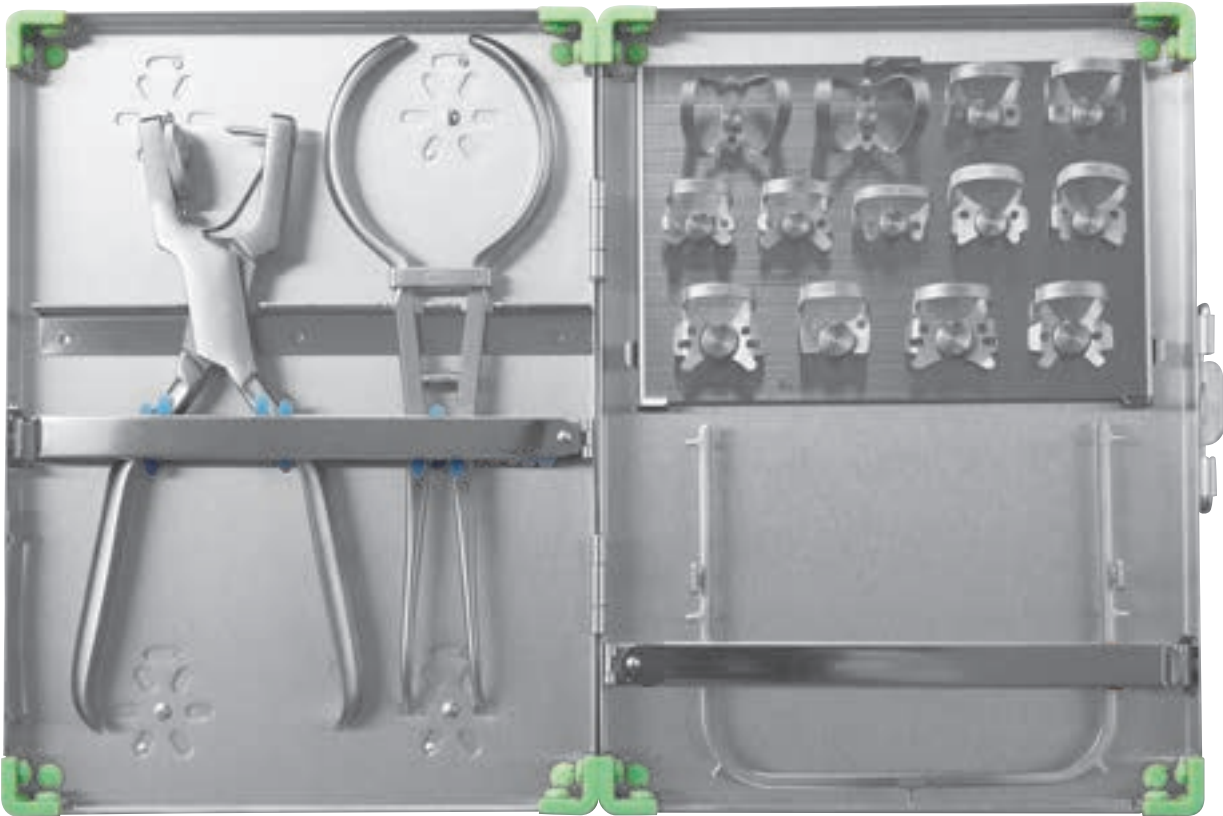

※緑色・青色部／材質Si 耐熱温度260℃

医療機器届出番号 11B1X1000667D402
一般的名称 歯科用ラバーダム防湿キット 販売名 ラバーダムキット タイプ2

エクスプローラー エンド用



1/1

●根管口や根管内の探索、根管内石灰化部の除去に有効です。



#16 コード No.01316
標準価格 4,070円

写真提供：石井 宏先生
(ペンシルバニア大学 非常勤講師
神奈川歯科大学 非常勤講師)

医療機器届出番号 11B1X1000664D102
一般的名称 歯科用探索針 販売名 エクスプローラー

ブローチホルダー



1/1



コード No.13150
標準価格 1,400円

医療機器届出番号 11B1X1000663D001
一般的名称 歯科用ブローチ 販売名 ブローチホルダー

ファイルホルダー タイプ2



1/1

- 届きにくい大白歯の上下運動もラクに行えます。
- 1本で近心根・遠心根の根管治療に使用できます。

[装着例]



コード No.08064
標準価格 9,570円

※装着可能ファイル／ヘッド径 φ3.2～4.2mm

洗浄用シリンジ 3ml タイプ2



1/1



コード No.13228
標準価格 8,860円

※本体／材質 PFA 耐熱温度260℃
※指かけ・押棒／材質 PP 耐熱温度155℃

医療機器届出番号 11B1X1000655D101
一般的名称 歯科用シリンジ 販売名 洗浄用シリンジ

吸引管 エンド用 タイプ2



(吸引管 本体〔ジョイント部φ10、φ11テーパー付〕、ノズル5本、ノズル掃除棒)

1/1

曲 コード No.13617
標準価格 **12,100円**

直 コード No.13615
標準価格 **11,000円**

ノズル先端外径／φ0.6mm

単 品

ノズル コード No.13616
標準価格 **4,800円** (5入)

ノズル掃除棒 コード No.90341
標準価格 **1,100円**

別 売

クリーニングブラシ S (φ4)
コード No.13651
標準価格 **4,200円** (12入)

サイズ／200mm

●吸引の気流で根管内を乾燥します。

※バキューム部内径φ10～φ11mmのユニットに使用できます。
※バキューム部内径が φ 16mmのユニットは、バキュームチップアダプターをご使用下さい。(P.12)

医療機器承認番号 21900BZX00981000
一般的名称 歯科用吸引管 販売名 吸引管 エンド用

リーマースタンド セイフティ



- リーマー・ファイルを患者さんごとに管理できます。
- リーマー・ファイルを収納したまま、超音波洗浄・オートクレーブ滅菌できます。
- 逆さにしても落ちない機構です。

サイズ／W48×D43×H47mm

コード No.08415
標準価格 **5,400円**

●本体前面にエンドゲージが付いています。

※収納可能サイズ

14mmまで
32mmまで

※穴径／φ2.0mm
※収納本数／11本
※緑色部／材質 PP 耐熱温度155℃
※製品にリーマー・ファイルは含まれません。

リーマーガード



- リーマー・ファイル別、長さ別等に区別して管理ができて便利です。
- 逆さにしても、リーマー・ファイルが落ちない機構です。

1/2

※収納可能サイズ

12mmまで
31mmまで

サイズ／W74×D10×H52mm

※穴径／φ2.0mm
※収納本数／8本
※材質 POM 耐熱温度162℃
※製品にリーマー・ファイルは含まれません。

●カバーを倒すとスタンドになります。

●ゲージがついています。

●連結して使用できます。

コードNo.	品名	標準価格
08431	イエロー	1,380円
08432	オレンジ	
08433	ピンク	
08434	ブルー	
08435	グリーン	

クリーンポット



- 治療中、リーマー・ファイルを紙できれいにすることができます。
- ペーパー交換式。

1/2

サイズ／φ45×H36mm

コード No.08423
標準価格 **7,800円**
(ペーパー 100 枚付)

※製品にリーマー・ファイルは含まれません。

単 品

ペーパー
コード No.08422
標準価格 **2,200円** (300枚入)

フィンガールーラー

4/5



コード No.21155
標準価格 3,800円



保存用スケール 4cm

1/1



コード No.21151
標準価格 1,380円

エンドゲージ

1/1

(表面)


コード No.21154
標準価格 9,570円

(裏面)


X線ゲージ

1/1


スリーブ


X線ゲージ


コード No.21157
標準価格 8,030円 (2入)

サイズ／X線ゲージ W33×D45mm
スリーブ W38×D48×H8.5mm

[装着方法]

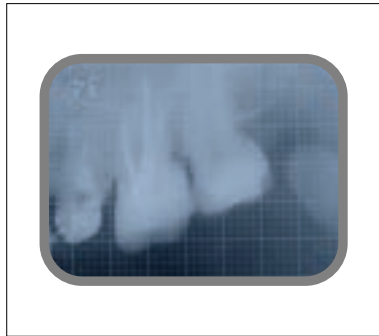※スリーブ／材質 Si 耐熱温度260℃

ガッタパーチャケース・ミニ

1/2

●仕切りが7個あるので、メイン・アクセサリーポイントを収納できます。

●オートクレーブ滅菌対応のポイントであれば、ケースごと滅菌できます。



コード No.24017
標準価格 6,500円

サイズ／W91×D42×H13mm


※緑色部／材質 Si 耐熱温度260℃
※製品にガッタパーチャポイントは含まれません。

クレンザー鉗子


1/1

●狭い根管内にも挿入できるよう、可能な限り先端を細く改良しました。


●破折リーマーの除去やガッタパーチャポイントの移送にも有効です。

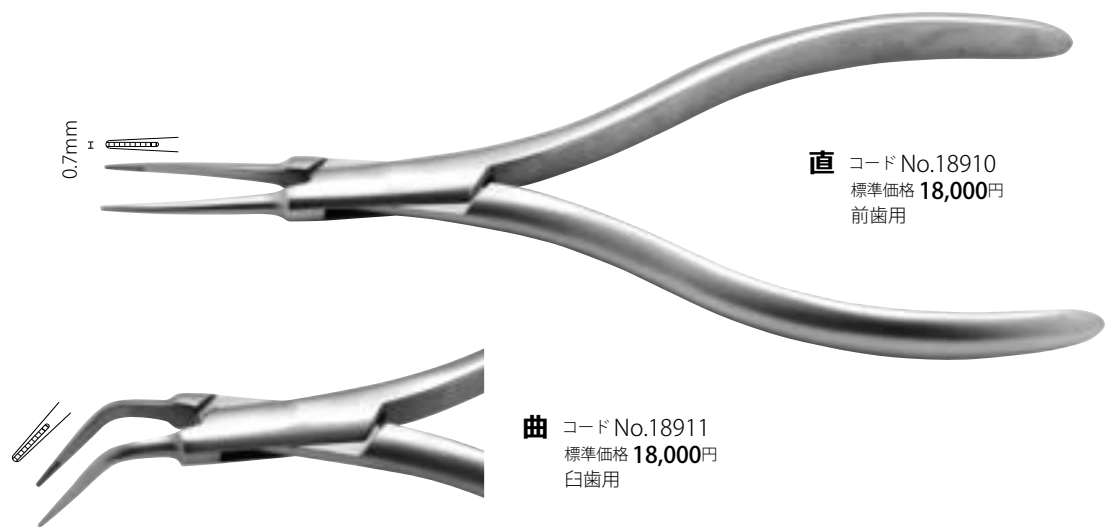

直
コード No.18910
標準価格 18,000円
前歯用

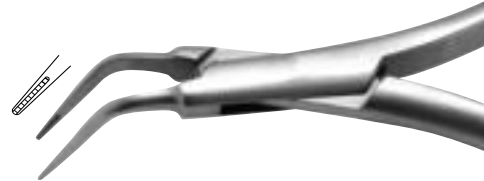

曲
コード No.18911
標準価格 18,000円
臼歯用

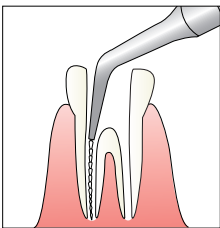

医療機器届出番号 11B1X1000642D005
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 クレンザー鉗子


ルートキャナルプライヤー

1/1

●破折リーマーやペーパーポイント、スクリューポストを保持します。



コード No.08063
標準価格 24,000円

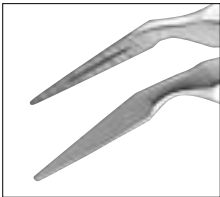

医療機器届出番号 11B1X1000642D004
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 ルートキャナルプライヤー

19

20

スプレッター

φ0.25mm
φ0.4mm
φ0.6mm
※テーパ－ 3%

S 23mm

#0.25S コード No.08001
標準価格 3,850円

#0.4S コード No.08002
標準価格 3,850円

#0.6S コード No.08003
標準価格 3,850円

L 28mm

#0.25L コード No.08004
標準価格 3,850円

#0.4L コード No.08005
標準価格 3,850円

1/1

φ0.4mm
※テーパ－ 3%

#1 コード No.08011
標準価格 3,520円
前歯用

#2 コード No.08012
標準価格 3,520円
上顎用

#3 コード No.08013
標準価格 3,520円
下顎用

医療機器届出番号 11B1X1000665D301
一般的名称 歯科用根管スプレッタ 販売名 スプレッター

1/1

スプレッター(ウルトラ)

●超弾性金属を使用しているため、湾曲している根管でも根壁にそって加圧できます。

▶ニッケルチタン製

φ0.25mm
φ0.4mm
※テーパ－ 3%

23mm

#0.25S コード No.08032
標準価格 6,330円

#0.4S コード No.08033
標準価格 6,330円

医療機器届出番号 11B1X1000665D301
一般的名称 歯科用根管スプレッタ 販売名 スプレッター

1/1

スプレッター ポイント式

- ハンドルとポイントの組合せが自由に選択できます。
 - 古くなったポイントだけを交換し、ハンドルを繰り返し使用できるので経済的です。
- ※滅菌・消毒の際は、サビの発生を防ぐためポイントを外して下さい。

ハンドル片頭

P-A コード No.10201
標準価格 3,200円
サイズ／φ8.0mm

P-F コード No.10205
標準価格 3,200円
サイズ／φ6.0mm

P-Aハンドル 医療機器届出番号 11B1X1000634D003
一般的名称 ナイフハンドル 販売名 P-Aハンドル
P-Fハンドル 医療機器届出番号 11B1X1000634D007
一般的名称 ナイフハンドル 販売名 P-Fハンドル

ハンドル両頭

P-B コード No.10202
標準価格 4,000円
サイズ／φ8.0mm

P-C コード No.10203
標準価格 4,000円
サイズ／φ6.0mm

P-Bハンドル 医療機器届出番号 11B1X1000634D004
一般的名称 ナイフハンドル 販売名 P-Bハンドル
P-Cハンドル 医療機器届出番号 11B1X1000634D005
一般的名称 ナイフハンドル 販売名 P-Cハンドル

2/3

ポイント

φ0.25mm
φ0.4mm
※テーパ－ 3%

#0.25S コード No.23551
標準価格 4,130円(3入)

#0.4S コード No.23552
標準価格 4,130円(3入)

医療機器届出番号 11B1X1000665D302
一般的名称 歯科用根管スプレッタ 販売名 スプレッター ポイント式

ルートキャナルプラグー

3本組 コード No.08025
標準価格 7,200円

φ1.3mm

#1 コード No.08026
標準価格 2,500円

φ1.0mm

#2 コード No.08027
標準価格 2,500円

φ0.7mm

#3 コード No.08028
標準価格 2,500円

医療機器届出番号 11B1X1000665D501
一般的名称 歯科用根管プラグー 販売名 ルートキャナルプラグー

1/1

根管充填器

3本組 コード No.08020
標準価格 6,000円

φ1.5mm

#1 コード No.08021
標準価格 2,000円

φ1.0mm

#2 コード No.08022
標準価格 2,000円

φ0.5mm

#3 コード No.08023
標準価格 2,000円

医療機器届出番号 11B1X1000665D503
一般的名称 歯科用根管プラグー 販売名 根管充填器

1/1

ガッタパーチャインストルメント

- 余分なガッタパーチャの切断と、その後の圧接が1本でできます。
- 加熱した熱が冷めにくい形状に設計しています。

φ2.0mm

※ヒートカッター

#1 コード No.08031
標準価格 3,630円

φ1.0mm

#2 コード No.08035
標準価格 3,630円

φ1.3mm

※プラグー

熱だまり

医療機器届出番号 11B1X1000665D502
一般的名称 歯科用根管プラグー 販売名 ガッタパーチャインストルメント

1/1


ヒートカッター

#1-2 コード No.08030
標準価格 6,200円

医療機器届出番号 11B1X1000665D001
一般的名称 歯科用練成充填形成器 販売名 ヒートカッター

1/1

●ガラスファイバーポストを切りたい長さに、簡単にカットできます。

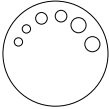

穴径 (mm)
φ0.8
φ1.05
φ1.25
φ1.5
φ1.65
φ2.1



●カットしたガラスファイバーポストはホルダーに入るので、飛びません。
●目盛りで切りたい長さを確認しながらカットできます。
(範囲/5mm~15mm)

コード No.08071
標準価格 16,000円

※ホルダー／材質 TPX 耐熱温度160℃


ファイバーカッター
タイプ2
での切断

ラウンドバー
での切断

カッティングディスク
での切断

ニッパー
での切断

写真提供：坪田 有史 先生(坪田デンタルクリニック・鶴見大学歯学部臨床教授)

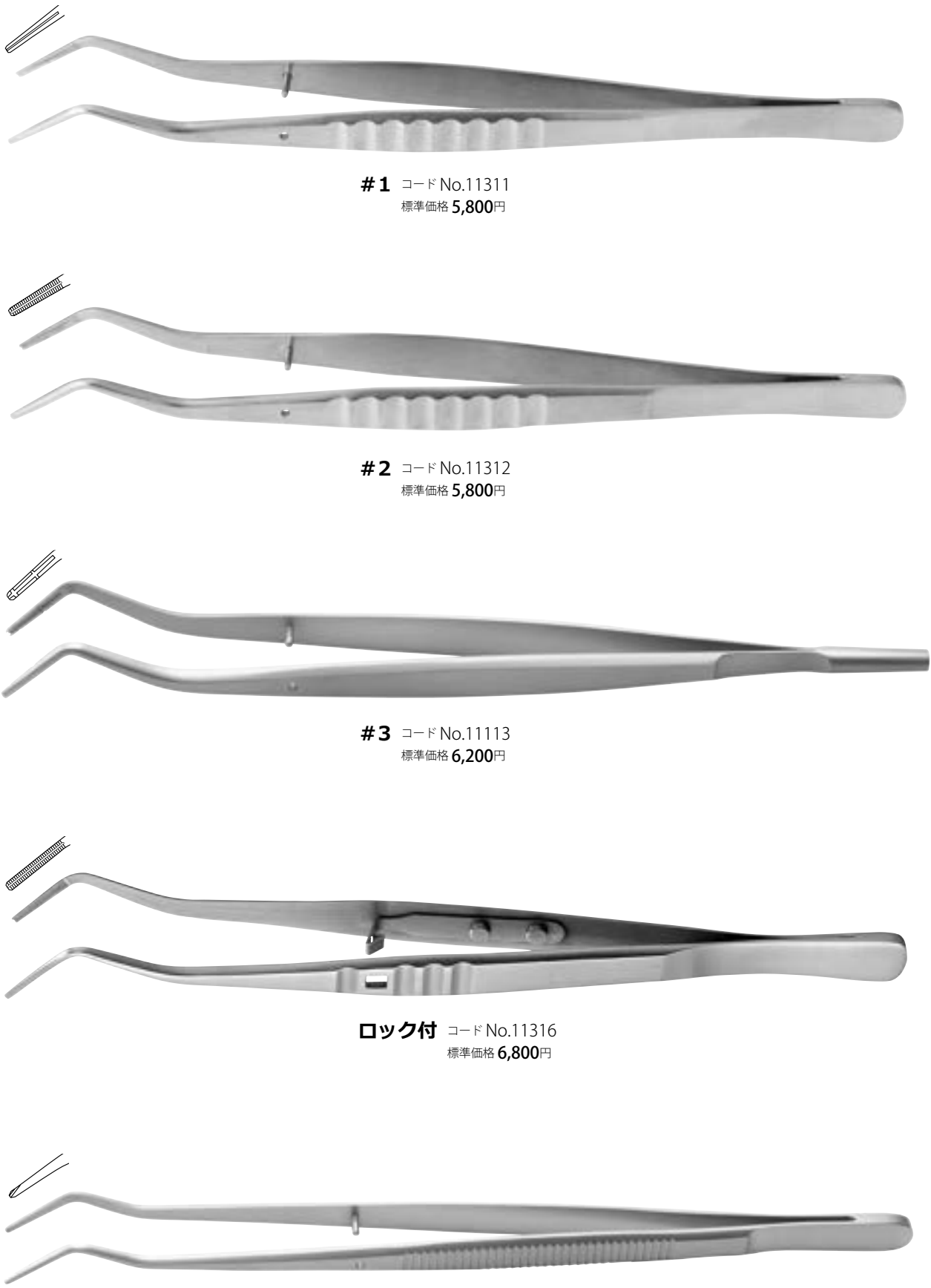

#1 コードNo.11311
標準価格 5,800円

#2 コードNo.11312
標準価格 5,800円

#3 コードNo.11113
標準価格 6,200円

ロック付 コードNo.11316
標準価格 6,800円

ビーチ型 コードNo.11117
標準価格 5,800円

