





製造販売元 **株式会社YDM**  
〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006  
問 合 先 デンタル事業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL: 03-3828-3161 FAX: 03-3827-8991  
http://www.ydm.co.jp/ E-mail: ydm@ydm.co.jp

掲載製品の標準価格は、2025年5月21日現在のものです。標準価格に消費税等は含まれておりません。  
製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがございます。

YDM オフィシャル SNS では様々な情報を発信しております。

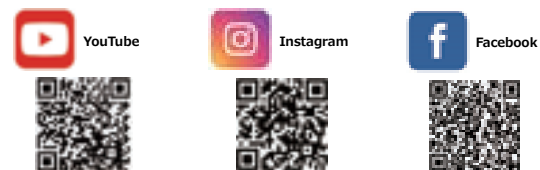

補綴  
Prosthetics

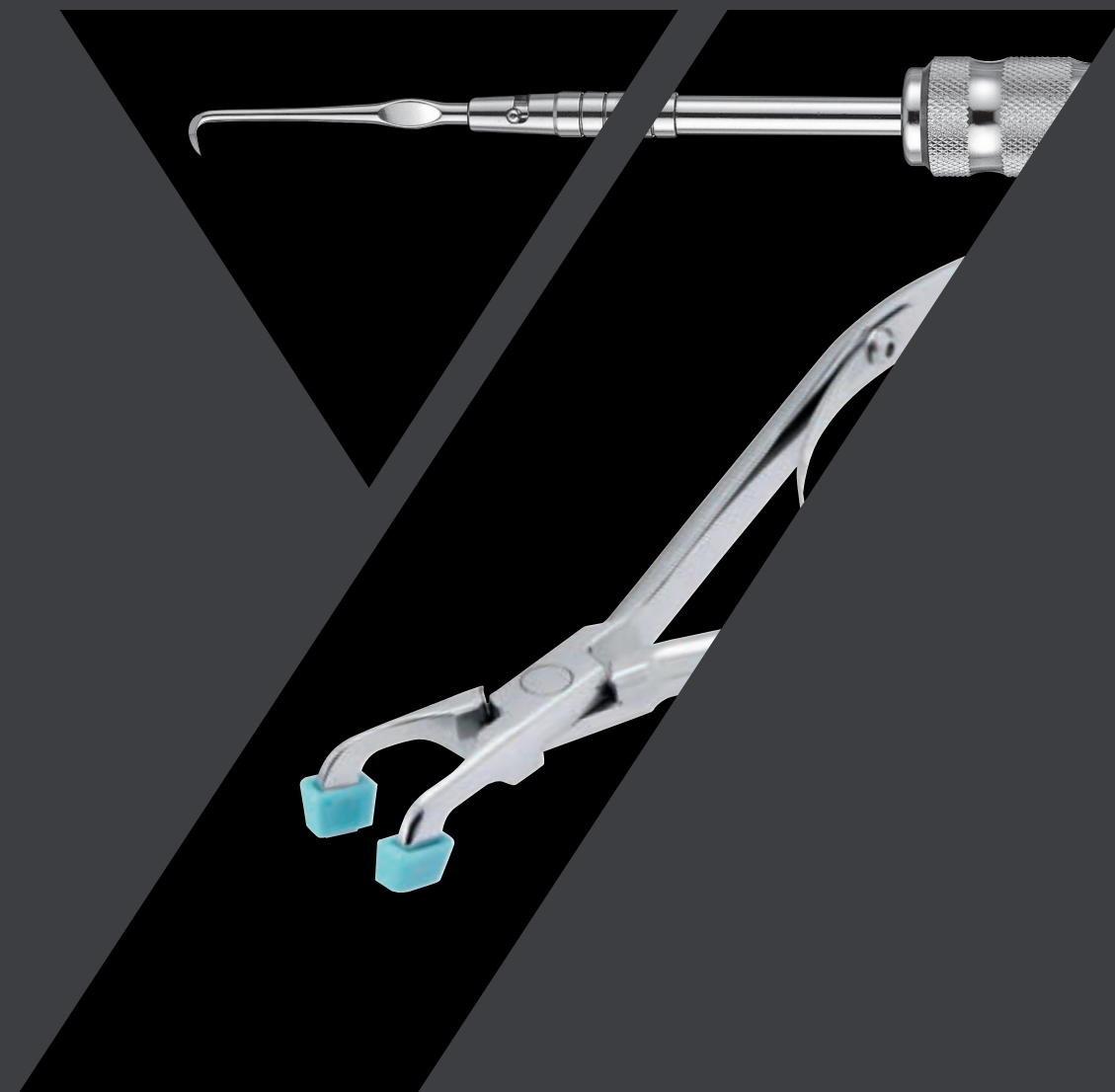


網トレー プレミアム



- トレークリーナーに浸漬しても、サビ・変色起きません。
- サイズがひと目で分かるように色分けされています。

▶ステンレス製

上顎用

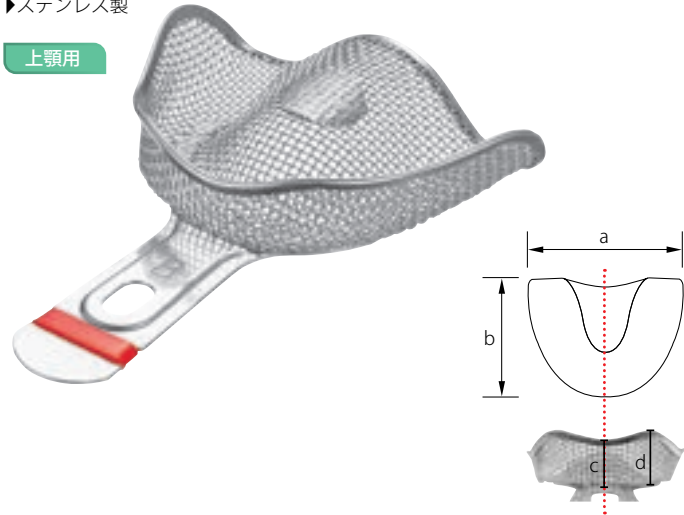

下顎用

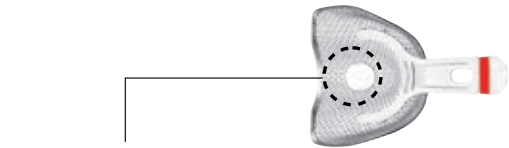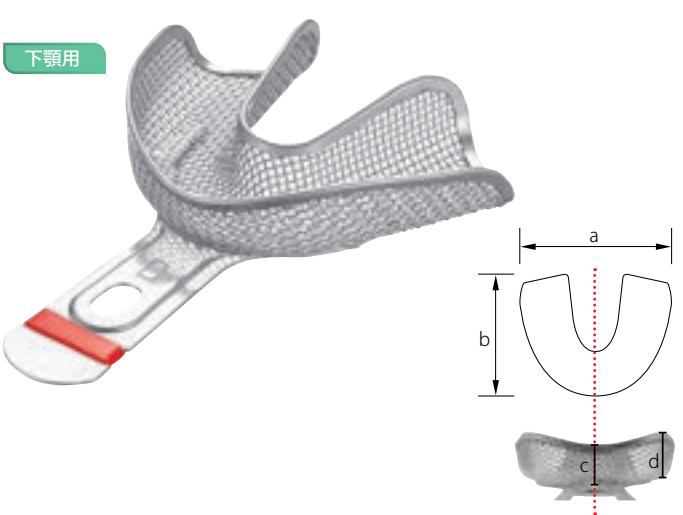


- フィンガーレスト付(上顎用)
- 保持位置の目安になります。
  - 押し出された印象材が指につくのを防ぎます。

| コードNo. | 品名    | サイズ (mm) |    |      |    | カラーリング | 標準価格   |  |
|--------|-------|----------|----|------|----|--------|--------|--|
|        |       | a        | b  | c    | d  |        |        |  |
| 19381  | 上顎用 A | 73       | 60 | 19.5 | 23 |        | 3,800円 |  |
| 19382  | 下顎用 A | 76       | 62 | 15   | 20 |        |        |  |
| 19384  | 上顎用 B | 70       | 55 | 17   | 22 |        |        |  |
| 19385  | 下顎用 B | 72       | 58 | 14.5 | 20 |        |        |  |
| 19387  | 上顎用 C | 66       | 53 | 15   | 20 |        |        |  |
| 19388  | 下顎用 C | 69       | 54 | 14   | 18 |        |        |  |

※カラーリング／材質 Si 耐熱温度260℃

片顎用

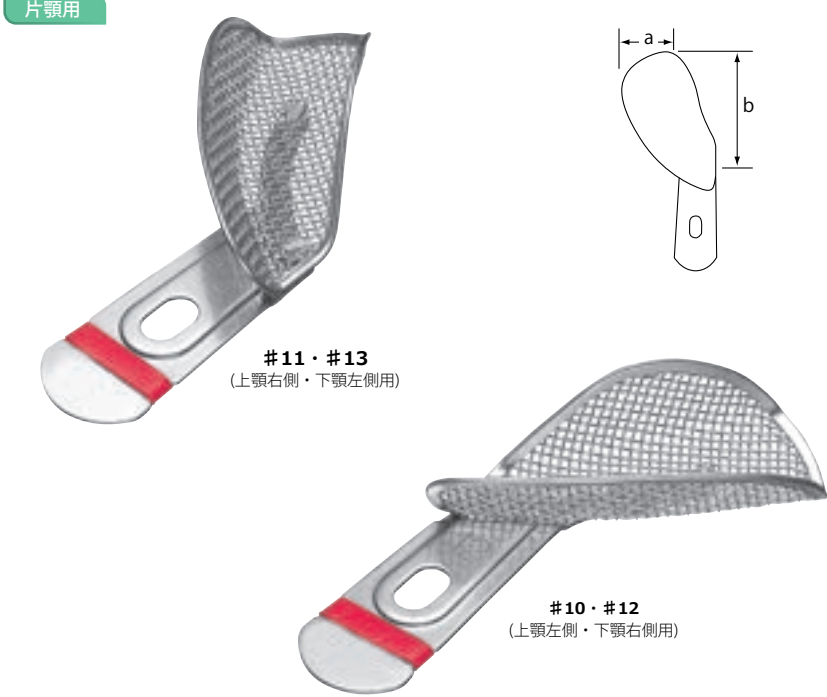

| コードNo. | 品名  | サイズ (mm) |    | カラーリング | 標準価格   |  |
|--------|-----|----------|----|--------|--------|--|
|        |     | a        | b  |        |        |  |
| 19391  | #10 | 20       | 60 |        | 3,000円 |  |
| 19392  | #11 |          |    |        |        |  |
| 19394  | #12 | 15       | 58 |        | 3,000円 |  |
| 19395  | #13 |          |    |        |        |  |

※カラーリング／材質 Si 耐熱温度260℃


局部用

▶回転式



1 歯用

▶回転式

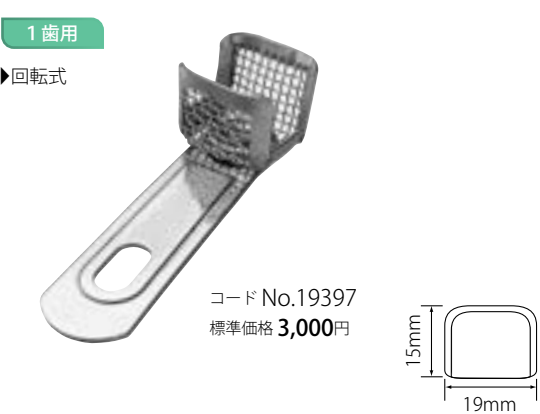


医療機器届出番号 11B1X1000668D105  
一般的名称 歯科印象採用用トレー 販売名 網トレー プレミアム

4/5

回転トレー

- ▶ステンレス製
- ▶回転式

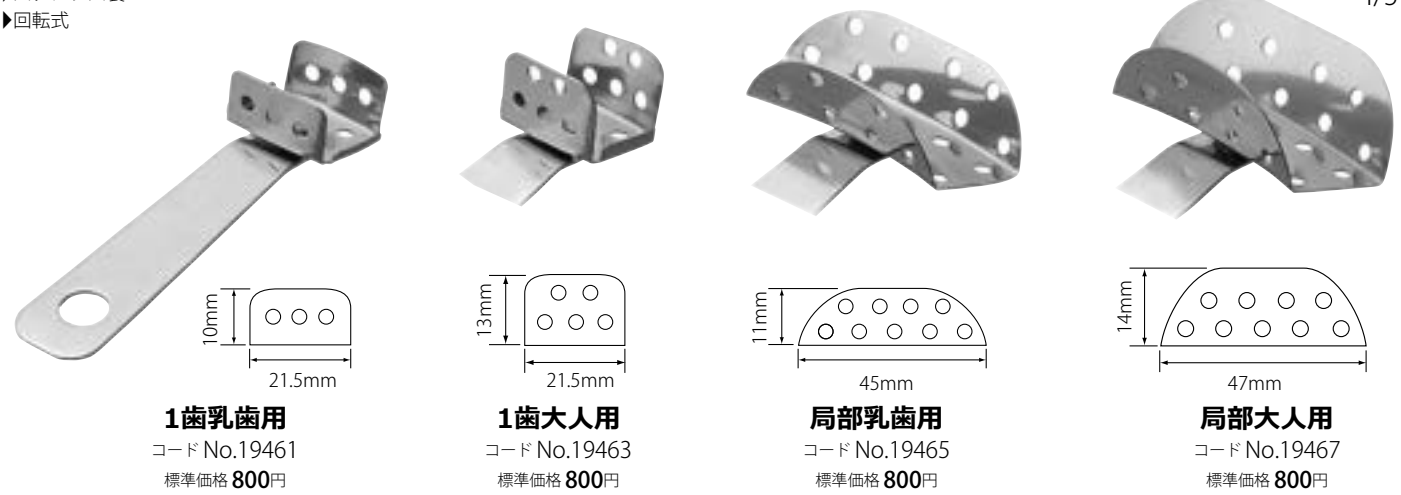

1歯乳歯用

コード No.19461

標準価格 800円

1歯大人用

コード No.19463

標準価格 800円

局部乳歯用

コード No.19465

標準価格 800円

局部大人用

コード No.19467


標準価格 800円

医療機器届出番号 11B1X1000668D106  
一般的名称 歯科印象採用用トレー 販売名 回転トレー

4/5

総山トレー

- ▶ステンレス製
- ▶回転式

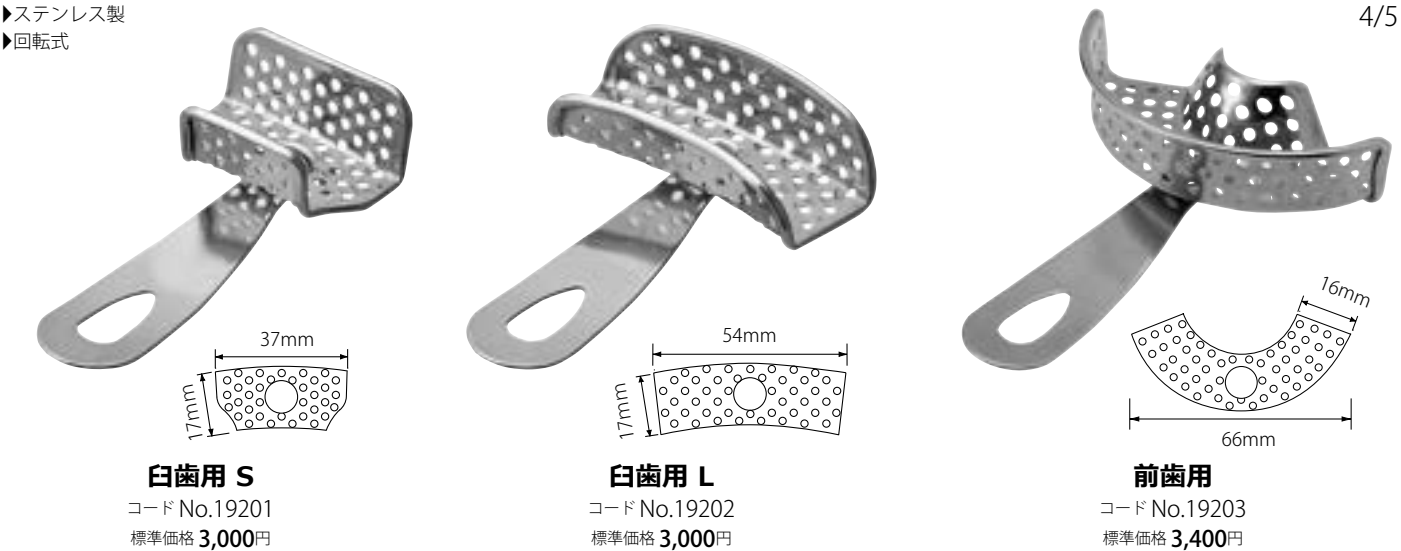

臼歯用 S

コード No.19201

標準価格 3,000円

臼歯用 L

コード No.19202

標準価格 3,000円

前歯用

コード No.19203

標準価格 3,400円

医療機器届出番号 11B1X1000668D103  
一般的名称 歯科印象採用用トレー 販売名 総山トレー

4/5


インプレッショントレー 片顎用

2個組

コード No.19030

標準価格 6,000円

▶ステンレス製

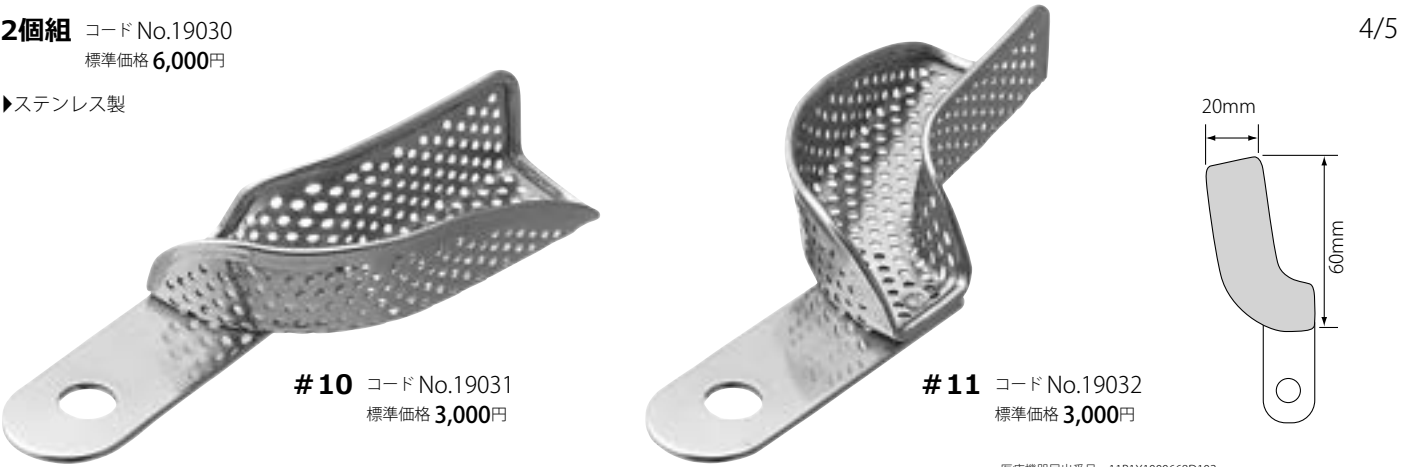

# 10

コード No.19031

標準価格 3,000円

# 11

コード No.19032

標準価格 3,000円

医療機器届出番号 11B1X1000668D102  
一般的名称 歯科印象採用用トレー 販売名 インプレッショントレー

4/5

カラートレー プレミアム




- サイズごとに色分けされているため、トレーの識別に便利です。
- トレー部が適度に柔らかく、サイズの微調整ができます。

2/5


▶アルミ製

上顎用

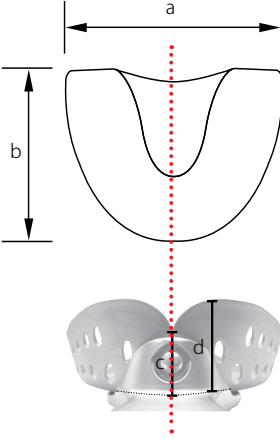

| コードNo. | 品名     | サイズ (mm) |    |    |    | 標準価格   |
|--------|--------|----------|----|----|----|--------|
|        |        | a        | b  | c  | d  |        |
| 19101  | ピンク    | 57       | 48 | 12 | 20 | 4,020円 |
| 19102  | ブルー    | 62       | 54 | 12 | 20 |        |
| 19103  | レッド    | 68       | 60 | 12 | 22 |        |
| 19104  | ゴールド   | 75       | 65 | 12 | 22 |        |
| 19105  | バイオレット | 84       | 70 | 13 | 22 |        |

下顎用

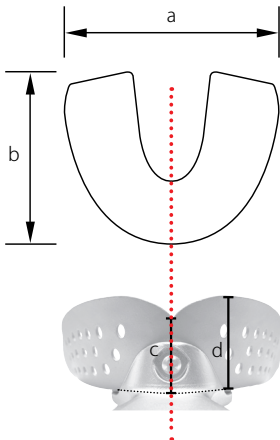

| コードNo. | 品名     | サイズ (mm) |    |    |    | 標準価格   |
|--------|--------|----------|----|----|----|--------|
|        |        | a        | b  | c  | d  |        |
| 19111  | ピンク    | 62       | 44 | 15 | 20 | 4,020円 |
| 19112  | ブルー    | 70       | 48 | 15 | 20 |        |
| 19113  | レッド    | 75       | 50 | 15 | 20 |        |
| 19114  | ゴールド   | 82       | 53 | 17 | 22 |        |
| 19115  | バイオレット | 88       | 55 | 17 | 22 |        |

※トレークリーナー使用不可  
※カラーリング／材質 Si 耐熱温度260℃

医療機器届出番号 11B1X1000668D101  
一般的名称 歯科印象採得用トレー 販売名 カラートレー

無歯顎用 トレー




8個組 コード No.19070  
標準価格 30,400円

2/5


▶ステンレス製

上顎用

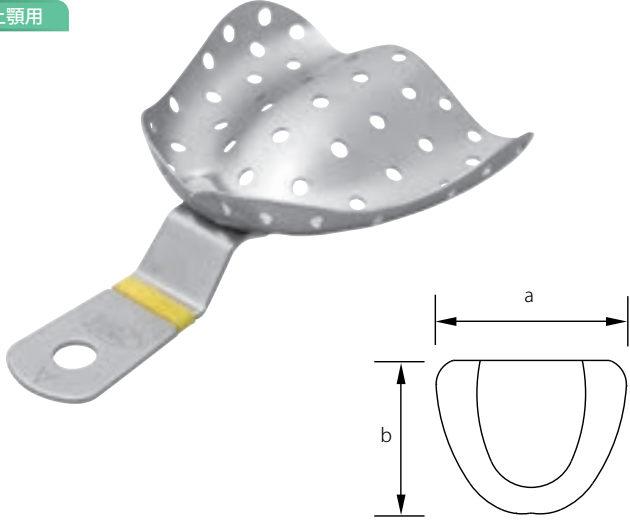

| コードNo. | 品名  | サイズ (mm) |    | カラーリング | 標準価格   |
|--------|-----|----------|----|--------|--------|
|        |     | a        | b  |        |        |
| 19071  | #UA | 73       | 62 | 3,800円 | 3,800円 |
| 19072  | #UB | 69       | 57 |        |        |
| 19073  | #UC | 66       | 56 |        |        |
| 19074  | #UD | 62       | 52 |        |        |

下顎用

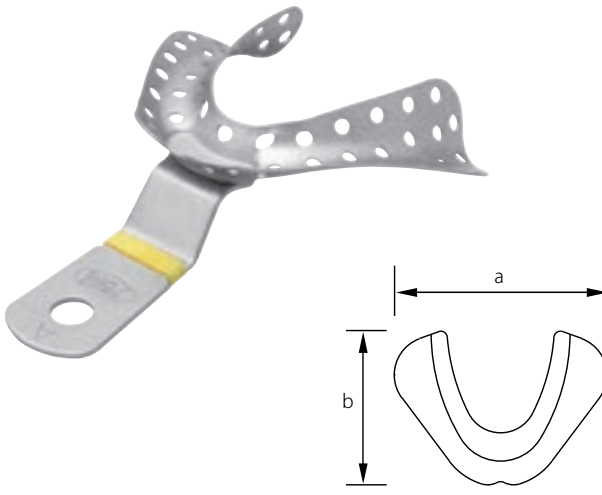

| コードNo. | 品名  | サイズ (mm) |    | カラーリング | 標準価格   |
|--------|-----|----------|----|--------|--------|
|        |     | a        | b  |        |        |
| 19081  | #LA | 78       | 60 | 3,800円 | 3,800円 |
| 19082  | #LB | 76.5     | 59 |        |        |
| 19083  | #LC | 73       | 54 |        |        |
| 19084  | #LD | 66       | 50 |        |        |

※カラーリング／材質 Si 耐熱温度260℃

医療機器届出番号 11B1X1000668D109  
一般的名称 歯科印象採得用トレー 販売名 無歯顎用トレー

バイトトレー K型 臼歯用




- 形成歯・対合歯の印象と咬合が一度に採得できます。

2/3



コード No.19320  
標準価格 6,400円 (用紙100枚付)

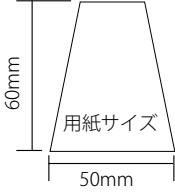

単品

| コードNo. | 品名    | 標準価格   | 入数    |
|--------|-------|--------|-------|
| 19321  | 臼歯用用紙 | 1,000円 | 300枚入 |

医療機器届出番号 11B1X1000668D104  
一般的名称 歯科印象採得用トレー 販売名 バイトトレー



寒天シリンジ (5/16) タイプ2

- 寒天サイズ5/16インチ用。ドライ・ウォーターいずれのコンディショナーにも使用できます。
- 本体は、テフロン樹脂で潤滑性があるため、寒天の押し出しがスムーズです。
- ヘッドは、ノズルの長さ・外径別に色分けされています。

1/1



| コードNo. | 品名        | ノズルの長さ | ノズルの外径 | 標準価格    |
|--------|-----------|--------|--------|---------|
| 13600  | 2S (ピンク)  | 10 mm  | φ0.8   | 10,670円 |
| 13601  | 2L (ブルー)  | 17 mm  |        |         |
| 13602  | 3S (グリーン) | 10 mm  | φ1.2   |         |

※10mm 一般印象用  
※17mm ポスト印象用

※寒天シリンジ内径の公差／φ7.9±0.1mm  
※本体／材質PFA 耐熱温度260℃  
※緑色部／材質PP 耐熱温度155℃

医療機器届出番号 1181X1000668D303  
一般的名称 歯科印象材用シリンジ 販売名 寒天シリンジ(5/16)

寒天シリンジ (CT) セット タイプ2

(本体、ノズル[太曲・1本、細曲 2本]、掃除棒 2本)

1/1



コード No.13568  
標準価格 12,100円

| 単 品    |     | ノズル(掃除棒2本付) |        |        |    |
|--------|-----|-------------|--------|--------|----|
| コードNo. | 品名  | ノズルのサイズ     |        | 標準価格   | 入数 |
| 13551  | 太曲  | 外径φ1.25     | 内径φ0.8 | 4,510円 | 3入 |
| 13552  | 細曲  | 外径φ 0.9     | 内径φ0.6 |        |    |
| コードNo. | 品名  | 標準価格        |        |        |    |
| 90303  | 掃除棒 | 1,100円      |        |        |    |

※黒色部／材質PPS 耐熱温度271℃

医療機器届出番号 1181X1000668D302  
一般的名称 歯科印象材用シリンジ 販売名 寒天シリンジ(CT)


ジンジバック インストルメント

- 先端部厚みが0.3mmと薄いため、歯肉溝へスムーズに挿入できます。

1/1



前歯用 #0.3 コード No.13107  
標準価格 4,730円

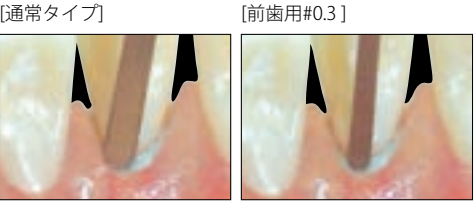


- 下顎前歯部圧排時、先端幅が通常タイプより狭いため、歯肉に負担をかけずに挿入できます。



白歯用 #0.3 コード No.13108  
標準価格 4,730円

- 《探針と同じ湾曲》で歯面に沿わせやすく、スムーズに操作できます。
- 《側面ヘラ》と《内面ヘラ》の組み合わせで歯肉溝に無理なく圧排糸を滑り込ませるスペースをつくるとともに、圧排糸の浮き上がりを押さえます。
- 圧排糸の種類や太さを選ばず、全顎に無理なく対応するオールマイティーな仕様です。

〔臨床動画〕

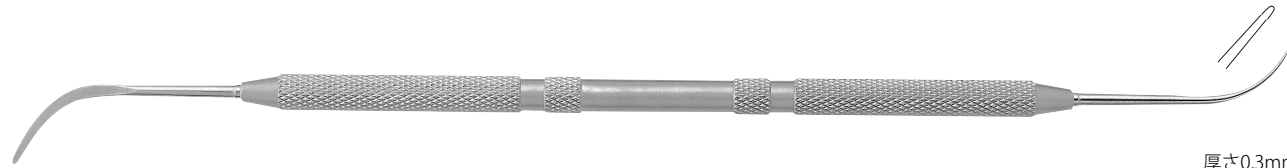

#0.3P コード No.13100  
標準価格 4,730円

考案 / 写真提供：青井良太先生 (SBC (Surgical Basic Course) 主幹)



- 側面ヘラ側の先端部で圧排糸の先を挿入します。
- 歯肉溝にスペースを作りながら背面で圧排糸を挿入します。
- 屈みにくい隣接面は内面ヘラ側を使用すると到達性がよくなります。



- 圧排糸が捕まりづらい挿入の始点や、滑りやすいシルク糸などに有効です。



超硬溶射加工

- 超硬溶射の凹凸は滑り止め効果がありながらも、圧排糸をほつれさせにくい仕様です。

〔臨床動画〕



白歯用#0.3TC コード No.13110  
標準価格 4,730円

※超硬溶射付  
厚さ0.3mm

医療機器届出番号 1181X1000665D701  
一般的名称 歯科用圧入充填器 販売名 ジンジバックインストルメント

クリアランスゲージ

- ゲージ先端径が2種類(φ1.5/φ2.0) があるため、クリアランスの確認が容易です。
- 先端が球状なため、どの向きで計測しても同サイズになり、操作性に優れています。





1/1



コード No.13201  
標準価格 4,800円

○ φ2.0mm

○ φ1.5mm
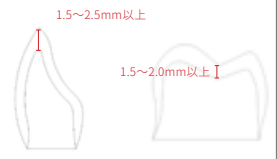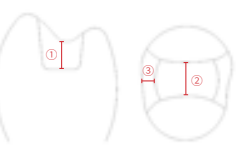
| CAD/CAM冠                                                                           |             | CAD/CAMインレー                                                                         |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | 1.5~2.5mm以上 |  | 1.5~2.0mm以上 |
| 前歯                                                                                 | 白歯          | ①小窩裂溝部                                                                              | 1.0~1.5mm以上 |
| 1.5~2.5mm以上                                                                        | 1.5~2.0mm以上 | ②イスマス                                                                               | 1.0~1.5mm以上 |
|                                                                                    |             | ③歯肉壁                                                                                | 1.0~1.5mm以上 |

※サイズは各メーカーの指定に従ってください。

医療機器届出番号 11B1X1000664D113  
一般的名称 歯科用探針 販売名 クリアランスゲージ

アルジネートスパチュラ タイプ3



3/4



コード No.11724  
標準価格 3,200円



コキ付 コード No.11725  
標準価格 3,200円

※ハンドル／材質 ABS 耐熱温度80℃

医療機器届出番号 11B1X1000666D003  
一般的名称 歯科用練成へら 販売名 アルジネートスパチュラ

石膏スパチュラ タイプ3



3/4



コード No.11704  
標準価格 3,200円



コキ付 コード No.11705  
標準価格 3,200円

※ハンドル／材質 ABS 耐熱温度80℃

医療機器届出番号 11B1X1000666D002  
一般的名称 歯科用練成へら 販売名 石膏スパチュラ

トレースパチュラ タイプ3



3/5



コード No.11743  
標準価格 4,800円

サイズ／200mm

※ハンドル／材質 ABS 耐熱温度80℃

[短いヘラ]



●石膏模型を容易に取り外すことができます。

[長いヘラ]



●印象材をトレーからカンタンに除去することができます。

アルジネートカッター



3/5




コード No.11741  
標準価格 1,600円

サイズ／185mm

※材質 PS 耐熱温度80℃

[スプーン部]

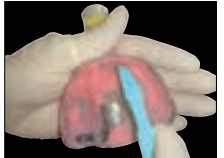

[ヘラ部]



●トレーの印象材を効率よく除去できます。

トレータワー タイプ3



1/4



コード No.13508  
標準価格 15,800円

サイズ／W123×D180×H165mm

※収納個数／全額トレー6個

●印象を採ったトレーや石膏を盛ったトレーを、場所を取らずに置くことができます。

トレータワー タイプ3用 湿箱



1/5



コード No.13509  
標準価格 7,260円

サイズ／W160×D218×H180mm

●湿箱に入れることにより、湿度を保ち、印象材や石膏の乾燥・変形を防ぎます。

金冠バサミ



4/5

**#10**  
コード No.12010  
標準価格 **9,800**円  
直  
サイズ／110mm

**#11**  
コード No.12011  
標準価格 **9,800**円  
曲  
サイズ／110mm

**#210**  
コード No.12210  
標準価格 **9,800**円  
直  
サイズ／115mm

**#211**  
コード No.12211  
標準価格 **9,800**円  
曲  
サイズ／115mm

**#311**  
コード No.12311  
標準価格 **9,800**円  
曲  
サイズ／92mm

**#510**  
コード No.12510  
標準価格 **9,800**円  
直  
サイズ／105mm

**#511**  
コード No.12511  
標準価格 **9,800**円  
曲  
サイズ／105mm

※修理にて「刃研ぎ」をお受けできます。

医療機器届出番号 11B1X1000635D101  
一般的名称 歯科用金冠はさみ 販売名 金冠バサミ

箔用バサミ



4/5

**直**  
コード No.12701  
標準価格 **9,800**円  
サイズ／110mm

**曲**  
コード No.12702  
標準価格 **9,800**円  
サイズ／109mm

※修理にて「刃研ぎ」をお受けできます。

医療機器届出番号 11B1X1000635D002  
一般的名称 はさみ 販売名 箔用バサミ

咬合紙ホルダー



1/1

**スタンダード** コード No.11251  
標準価格 **6,200**円

**クレンメル** コード No.11250  
標準価格 **9,800**円

●咬合紙の抜け防止に優れています。

**鉗子形** コード No.11252  
標準価格 **6,800**円

医療機器届出番号 11B1X1000636D301  
一般的名称 歯科咬合紙用ピンセット 販売名 咬合紙ホルダー

コンタクトゲージ 両頭 セット

(ホルダー、ゲージ30μm2枚・50μm2枚・110μm1枚)



4/5



サイズ／165mm

コード No.21147  
標準価格 **27,830**円

●使用中、ホルダーから外れないよう、フックが付いています。

※ゲージ色部／材質 POM 耐熱温度162℃

コンタクトゲージ 片頭 セット

(ホルダー、ゲージ30μm2枚・50μm2枚・110μm1枚)



4/5



サイズ／140mm

コード No.21148  
標準価格 **24,530**円

※ゲージ色部／材質 POM 耐熱温度162℃

| 単 品 ※ 両頭、片頭用共通です。                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | コードNo. | 品名                 | 標準価格   | 入数  |       |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------|-----|-------|--------|---------|
|  |  |  |  | 21142  | コンタクトゲージ 30(グリーン)  | 8,470円 | 5枚入 | 21146 | 両頭ホルダー | 19,360円 |
|  |  |  |  | 21136  | コンタクトゲージ 50(ブルー)   |        |     | 21131 | 片頭ホルダー | 16,060円 |
|  |  |  |  | 21137  | コンタクトゲージ 110(イエロー) |        |     |       |        |         |
|  |  |  |  | 21138  | コンタクトゲージ 150(レッド)  |        |     |       |        |         |
| 30μm                                                                                | 50μm                                                                                | 110μm                                                                               | 150μm                                                                               |        |                    |        |     |       |        |         |

コンタクトゲージ ハンドル付

- コンタクトゲージとハンドルが一体化になっています。
- ハンドルをつかむと、ゲージのたわみを張ることができ、歯間部に入れやすくなります。
- ハンドルがゲージの厚みごとに色分けされています。



4/5



**30**  
コード No.21161  
標準価格 **9,680**円 (5入)  
厚さ／30μm



**50**  
コード No.21162  
標準価格 **9,680**円 (5入)  
厚さ／50μm



**110**  
コード No.21163  
標準価格 **9,680**円 (5入)  
厚さ／110μm

※サイズ／67mm  
※色部／材質 PP 耐熱温度155℃



PAT.

セメントスパチュラ



1/1



**# 1** コード No.11551  
標準価格 **3,800**円



**# 3** コード No.11553  
標準価格 **4,400**円



**# 22** コード No.11522  
標準価格 **3,800**円



**# 24** コード No.11524  
標準価格 **3,800**円



余剰セメント除去器

- #1はブローラーとスケーラーの組合わせで、余剰なセメントを効率よく除去できます。
- #2はグレーシーキュレットの#G11-12と同じ屈曲をしているため、臼歯部隣接面まで届きやすいです。

〔臨床動画〕



1/1



#1 コードNo.13205  
標準価格 4,400円



#2 (臼歯用) コードNo.13206  
標準価格 4,840円




写真提供: 天川 由美子先生 (天川デンタルオフィス外苑前 院長)

医療機器届出番号 11B1X1000642D015  
一般的名称 歯科用起子及び刮離子 販売名 余剰セメント除去器

インレー・クラウンセッター セット


(ハンドル、フラットラバー・ピン付ラバー各2入、ドライバー)

- 補綴物をセットする際に、患者様に咬んでもらうことにより、適度な圧力がかかり補綴物の浮上りを防止します。

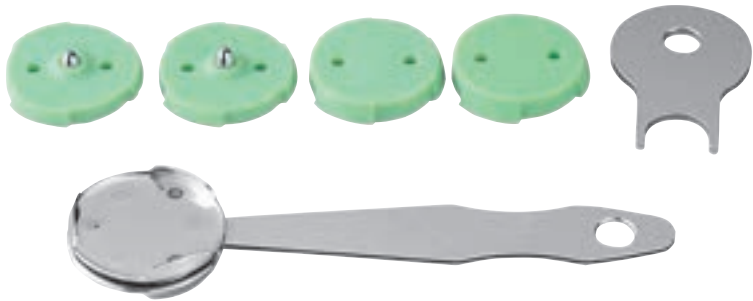


コードNo.13230  
標準価格 5,000円

〔インレーセット時〕

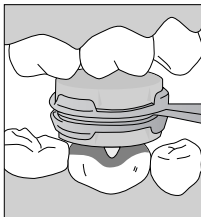

- ピン付ラバーとフラットラバーを片面ずつ装着。

〔クラウンセット時〕

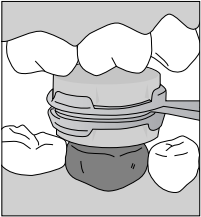

- フラットラバーを両面に装着。

※緑色部／材質 Si 耐熱温度260℃

| 単 品    |         |        |    |
|--------|---------|--------|----|
| コードNo. | 品名      | 標準価格   | 入数 |
| 13231  | フラットラバー | 1,000円 | 2入 |
| 13232  | ピン付ラバー  | 2,000円 | 2入 |

クラウン グリッパー

- テンポラリークラウンの撤去やクラウンの試適等に便利です。

1/1



コード No.21083  
標準価格 19,800円

サイズ／165mm

超硬付



- クラウン保持部に細かい溝を付与した超硬チップが付いているため、滑らずにしっかりと掴めます。



- ハサミタイプは、把持、開閉がしやすく、操作時のストレスが軽減されます。



- 細いハンドルが適度になることにより、保持感覚が伝わります。力のコントロールがしやすく、クラウン破損のリスクが軽減されます。



- 分銅式のリムーバーでは操作がしにくい臼歯部にもラクに届き、安定して掴めます。

写真提供: 木戸 淳太 先生 (米国補綴専門医 つきやま歯科医院)

写真提供: 林 康弘 先生 (林歯科医院 院長)

医療機器届出番号 11B1X1000639D206  
一般的名称 鉗子 販売名 クラウングリッパー



クラウン リムービング プライヤー PRO 上顎前歯用

135℃

UV


- 上顎前歯部の試適したクラウンを壊さず、傷をつけずに撤去します。
- 破折やキズに細心の注意が必要なセラミッククラウンやハイブリッドセラミッククラウン等に有効です。

1/1



コード No.21080  
標準価格 28,000円  
(UAチップ LP〔唇側用・口蓋側用〕各5入)

サイズ／135mm

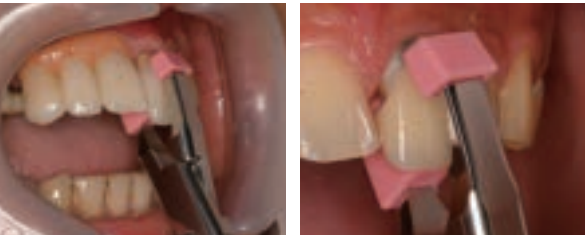

写真提供：甘利佳之先生（アマリ歯科クリニック 院長）

⚠ 撤去の際はクラウンのマージン部を把持しないで下さい。  
特にセラミックやレジン系のクラウンはマージン部等の薄い部分を把持すると破折する恐れがあります。また、クラウンに過度な力を加えると破折や傷をつける恐れがあります。操作は力の加減をしながらゆっくりと行って下さい。

単 品  
UAチップ LP〔唇側用・口蓋側用〕  
コード No.90459  
標準価格 2,000円（各5入）

※チップ／材質Si 耐熱温度260℃

ホールグリップ効果 PAT.P

唇側面 クラウンの豊隆部をつかみます。先端部のホール（穴）が豊隆部を包みこみ、縁のグリップ効果により、安定してクラウンを把持できます。



※イラストはチップ内で得られている効果のイメージです。

○ホールグリップ


〔先端部ホール〕



チップ内面には窪みを付与し、チップ上からでも「ホールグリップ効果」が得られます。

フレキシブルフィット効果 PAT.P

口蓋側面 舌側窩にあわせてチップが変形してフィットします。さまざまな凹形状に対応。面で当てることで滑りにくく安定して把持できます。

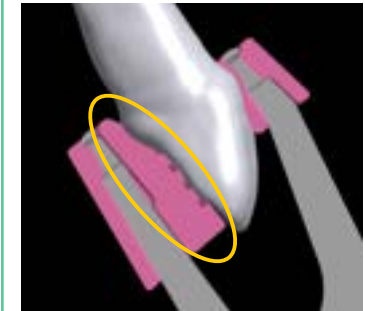

○フレキシブルフィット



チップ内面に操作方向と逆に効く滑り止めの溝がついています。

バネによる微調節効果

- バネの反発力により、過度なハンドルの握りこみを防ぎます。
- 力のコントロールがしやすくクラウンの破折を防ぎます。



クラウン リムービング プライヤー PRO

135℃

UV


1/1

- 試適したクラウンを壊さず、傷をつけずに撤去します。
- 破折やキズに細心の注意が必要なセラミッククラウンやハイブリッドセラミッククラウン等に有効です。
- 臼歯部におすすめです。



コード No.21079  
標準価格 28,000円（チップ 10入）

サイズ／160mm

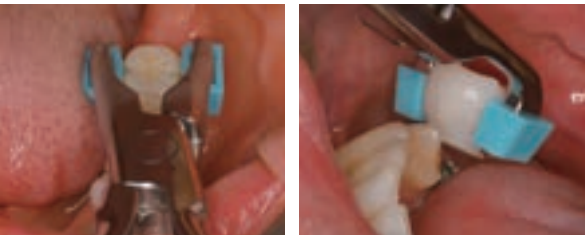

写真提供：甘利佳之先生（アマリ歯科クリニック 院長）

単 品  
チップ  
コード No.90455  
標準価格 2,200円（10入）

⚠ 撤去の際はクラウンの豊隆部を把持して下さい。特にセラミックやレジン系のクラウンはマージン部等の薄い部分を把持すると破折する恐れがあります。また、クラウンに過度な力を加えると破折や傷をつける恐れがあります。操作は力の加減をしながらゆっくりと行って下さい。

ホールグリップ効果 PAT.6299023

- クラウンの豊隆部をつかみます。先端部のホール（穴）が豊隆部を包みこみ、縁のグリップ効果で安定してクラウンを把持します。



※イラストはチップ内で得られている効果のイメージです。

○ホールグリップ


〔先端部ホール〕



チップ内面には窪みを付与し、チップ上からでも「ホールグリップ効果」が得られます。

パラレル把持効果

- 左右の先端部がクラウンをパラレル（平行）に挟みこみ把持します。
- 先端全面でクラウンをつかむため、高い保持力が得られます。

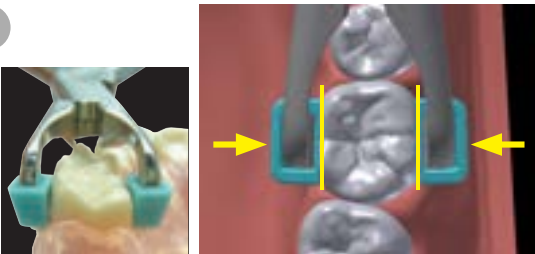


バネによる微調節効果

- バネの反発力により、過度なハンドルの握りこみを防ぎます。
- 力のコントロールがしやすく、クラウンの破折を防ぎます。



ロングハンドル効果

- 120 mmのロングハンドルで、臼歯部まで容易に届きます。
- 分銅式リムーバーでの操作が難しい大臼歯部のクラウン撤去に有効です。

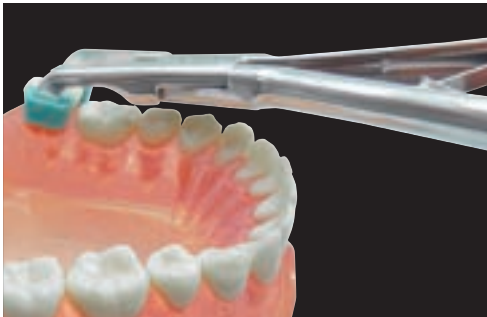

※チップ／材質Si 耐熱温度260℃

医療機器届出番号 1181X100642D034  
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 クラウンリムービングプライヤーPRO

テンポラリー クラウン 撤去プライヤー


●歯肉・支台歯に損傷なく撤去できます。



1/1



コード No.21077  
標準価格 18,000円

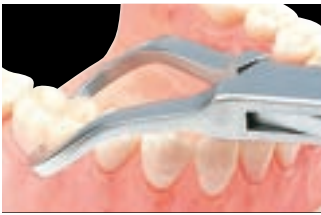

医療機器届出番号 11B1X1000642D010  
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 テンポラリークラウン撤去プライヤー

クラウン スプリッティング プライヤー

●左右均等に広げるので、支台歯に負担がかからず動揺歯にも使用できます。




1/1




コード No.18593  
標準価格 24,000円



〔臨床動画〕

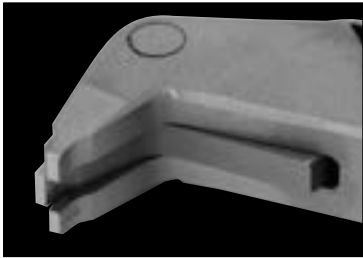

●ハンドルを握ると先端が開きます。

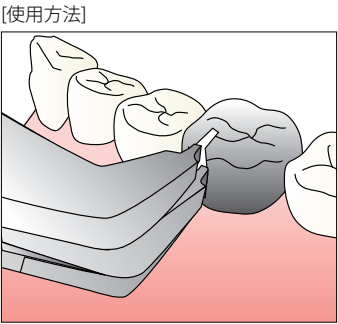

〔使用方法〕

- ①バーでクラウンにスリットを入れます。  
※スリット幅はプライヤーの先端幅0.9mm以上。  
※臼歯部は頬側近心隅角付近に咬合面中央部まで入れます。
- ②スリットにプライヤーの先端を合わせ、  
ハンドルを握ると先端が均等に開き、クラウンが外れます。


医療機器届出番号 11B1X1000642D011  
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 クラウンスプリッティングプライヤー

リムービング ドライバー

●てこの作用を応用して撤去します。




1/1

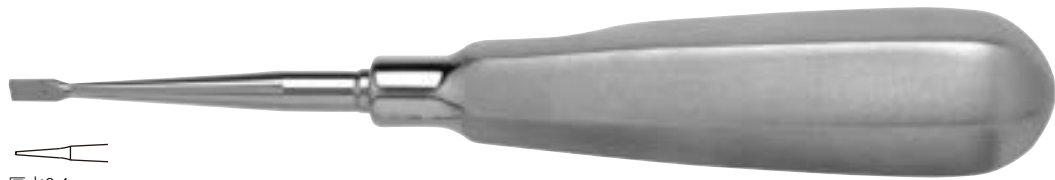


厚さ0.4mm

S コードNo.21073  
標準価格 8,800円

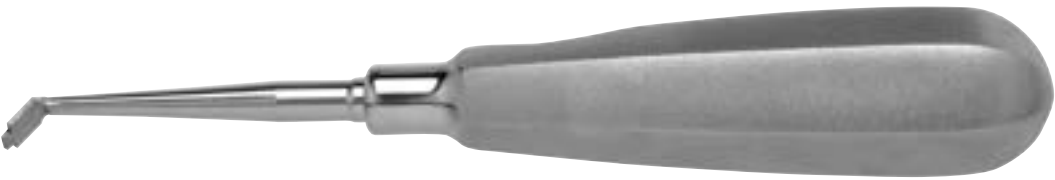

C コードNo.21074  
標準価格 8,800円

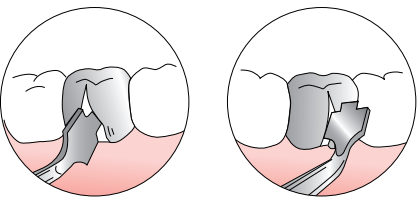

医療機器届出番号 11B1X1000642D020  
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 リムービングドライバー

クラウン スリッター



1/1



コード No.21060  
標準価格 12,000円

医療機器届出番号 11B1X1000642D007  
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 クラウンスリッター

# オートマチック クラウン リムーバー セット



(ハンドル、リムーバーポイントS・W各1本)


4/5

- ハンドルを片手で握るだけで振動を与えられるので、もう片方の手を先端にそえることができます。
- 振動の強弱の調整が可能です。
- 上向きでも下向きでも、同様の振動を与えることができます。



コード No.21010  
標準価格 48,000円

[注油]

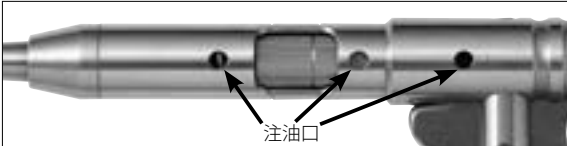

- 定期的に注油をして下さい。

医療機器届出番号 11B1X1000642D025  
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 オートマチッククラウンリムーバーセット


# インレー・クラウン リムーバー セット



(ハンドル、リムーバーポイントS・W各1本)

4/5

- ポイントを回転フック式で固定するため、使用中に振動で弛みません。

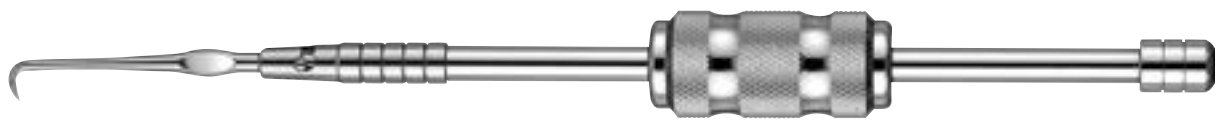

コード No.21020  
標準価格 14,400円

単品

インレー・クラウンリムーバー ハンドル  
コードNo.21021  
標準価格 6,800円

ハンドル 医療機器届出番号 11B1X1000642D022  
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 インレー・クラウンリムーバー ハンドル  
セット 医療機器届出番号 11B1X1000642D023  
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 インレー・クラウンリムーバーセット

# インレー・クラウン リムーバー Lセット



(Lハンドル、リムーバーポイントS・W各1本)

4/5

- 分銅が重く、1回のストロークでかかる力が大きいので、少ないストローク数で撤去できます。




コード No.21018  
標準価格 14,400円

単品

インレー・クラウンリムーバー Lハンドル  
コードNo.21019  
標準価格 6,800円

Lハンドル 医療機器届出番号 11B1X1000642D035  
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 インレー・クラウンリムーバーLハンドル  
セット 医療機器届出番号 11B1X1000642D036  
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 インレー・クラウンリムーバーLセット

## リムーバーポイントの装着方法

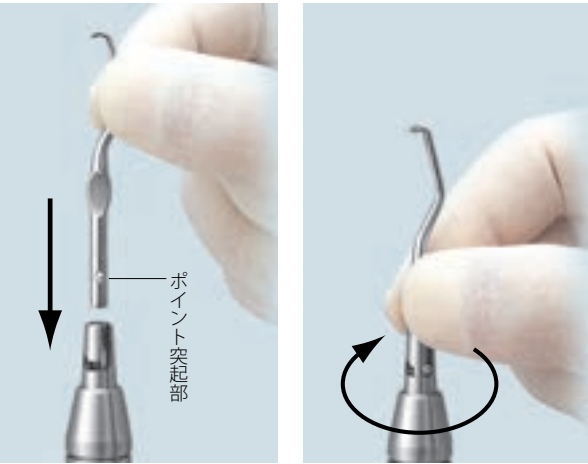

- ポイントがワンタッチ着脱できます。
- ポイント突起部をタテ溝に沿って挿入し、回転させて固定します。

※オートマチック クラウン リムーバー セット、  
インレー・クラウン リムーバー セット、  
インレー・クラウン リムーバー Lセットの共通になります。

単品

1/1

## リムーバーポイント



W

コード No.21012  
標準価格 3,800円



S

コード No.21013  
標準価格 3,800円



クサビ型

コード No.21014  
標準価格 3,800円



頬側用

コード No.21015  
標準価格 3,800円

医療機器届出番号 11B1X1000642D001  
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 リムーバーポイント



# メタルコアリムービングダブルドライバー


- 力を頬舌側から均等に歯軸方向へ作用させるため、歯質への襲撃が少なく使用できます。
- 前歯部から臼歯部まで部位を選ばずにアクセスできます。

〔臨床動画〕 1/1




- 舌・口蓋側には先端が【15° 屈曲】した「曲 舌側用」を用いることで、反対側の歯列を避けて咬合面と平行にアクセスが可能。歯軸方向に力を作用させて歯根破折を防ぎます。

※ハンドルに直 頬側用「DDT-S」・曲 舌側用「DDT-C」と刻印が入っています。

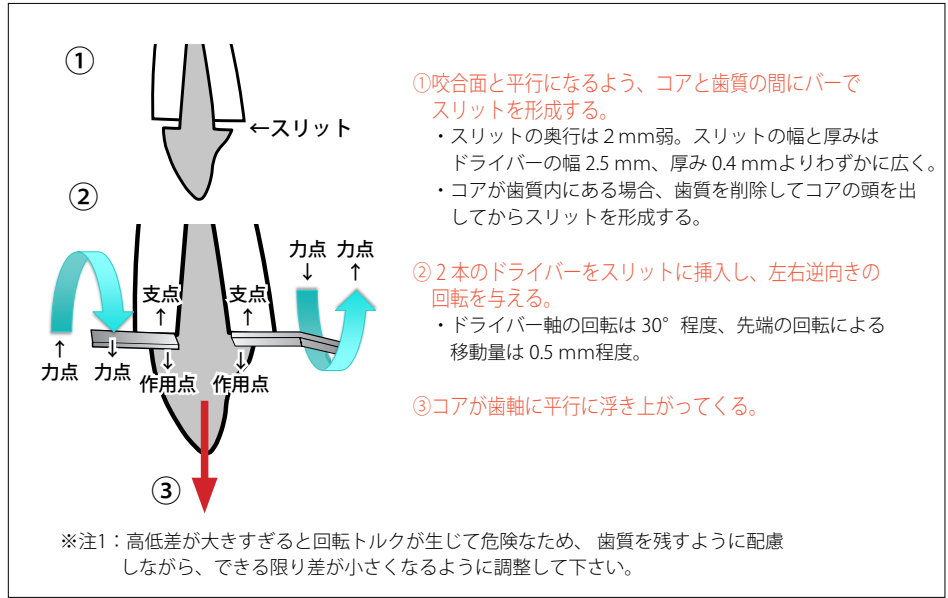

【分割コア除去症例】

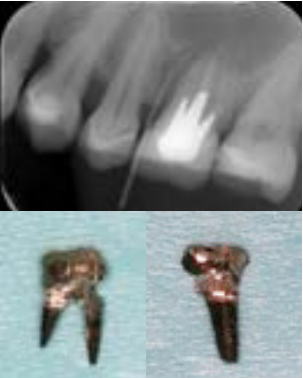


写真提供：北村和夫先生  
(日本歯科大学附属病院 総合診療科 教授)

医療機器届出番号 1181X1000642D037  
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 メタルコアリムービングダブルドライバー


# メタルコアリムービングプライヤー

- バネの反発力により、過度なハンドルの握りこみを防ぎます。
- 先端がコンパクトなため、隣在歯への接触を防ぎ操作がスムーズです。

〔臨床動画〕 1/1

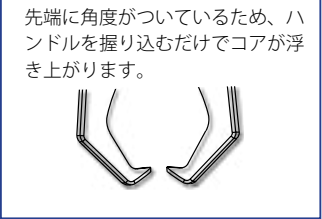


〔使用方法〕

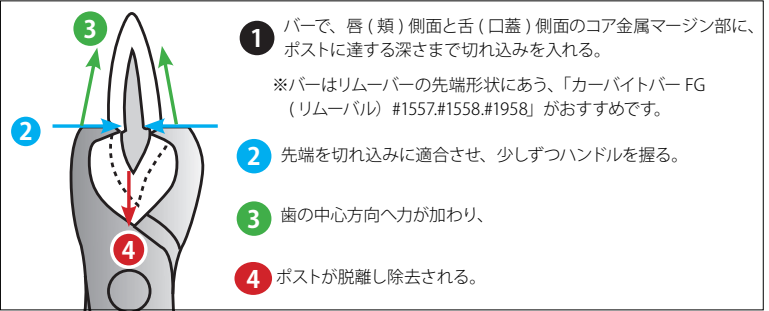

写真提供：甘利佳之先生（アマリ歯科クリニック 院長）

医療機器届出番号 1181X1000642D038  
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 メタルコアリムービングプライヤー

# スクリューポスト 撤去鉗子 曲

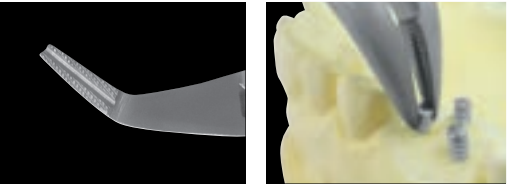

医療機器届出番号 1181X1000642D009  
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 スクリューポスト撤去鉗子