

New Product

October 21, 2014 YDM


◆インプラントや補綴物を傷つけにくい樹脂製プローブ カラープローブ ポイント式

コード No.151619 標準価格 各¥5,500(5入)

- 測定値が見やすいカラーリングです。
- 先端径はφ0.45mmと細く、歯周組織への負担を軽減します。
- ハンドルはミラーハンドルを使用します。専用ハンドルではないのでコストを抑えられます。



#2

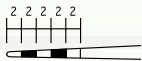

#4




#5

※材質 PPSU 耐熱温度 200℃
 ※紫外線殺菌不可




目盛り部分の断面拡大

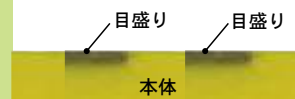

レーザーで刻印された目盛りは本体樹脂内部(80μm)まで浸透しているため、剥がれにくく長持ちします。

ミラーハンドル

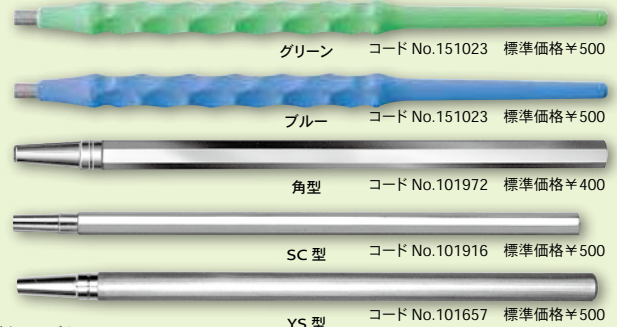

グリーン・ブルー
 ※材質 POM 耐熱温度 162℃
 ※紫外線殺菌不可

医療機器届出番号 11B1X1000625D003 一般的名称 歯鏡

医療機器届出番号 11B1X1000664D007 一般的名称 歯周ポケットプローブ

◆細くしなる先端で微細な歯石も探知できる

歯周用 エクスプローラー

- 先端が細く適度な弾力があるため、先端から伝わる振動で微細な歯面の状態まで探知できます。
- 歯肉縁下歯石やカリエスの探知、補綴物マージン部のチェックなどに有効です。



片頭 #3A

コード No.151618
 標準価格 ¥1,600



両頭 #11-12

コード No.101642
 標準価格 ¥2,300




グレーシーキュレット# 11-12 とシャンクが同じ形態の為、臼歯部隣接面の深いポケット内にも届きます。

医療機器届出番号 11B1X1000664D102 / 11B1X1000664D101 一般的名称 歯科用探針

口角鉤 D

- 口角鉤 B (※1) では大きいことがある幼児から小学生低学年向けのサイズです。
- 成人の咬合面撮影時に、口唇鉤として使用するのに適しています。

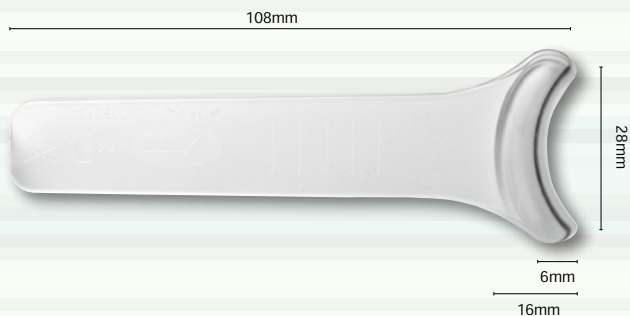

上顎咬合面撮影



口角鉤 D は口唇から口角上部（下顎撮影時は下部）までの範囲で装着される為、口角鉤がミラー挿入の妨げになったり、写り込むことなく、口唇と頬粘膜をしっかり排除できます。

※材質 TPX 耐熱温度 160℃
※乾熱滅菌・紫外線殺菌不可

※1：小児から小さいサイズの成人向け（YDM 製）


医療機器届出番号 11B1X1000650D204 一般的名称 歯科用開口器

◆インプラント治療で自家骨や人工骨の移送、填入に ボーンキャリア

コード No.151626 標準価格 各¥8,500

- 操作部と填入部が近いので、安定した操作ができます。

規格	先端外径 (mm)	収納容量 (cc)
Φ 2.9	Φ 2.9	0.02
Φ 3.4	Φ 3.4	0.03

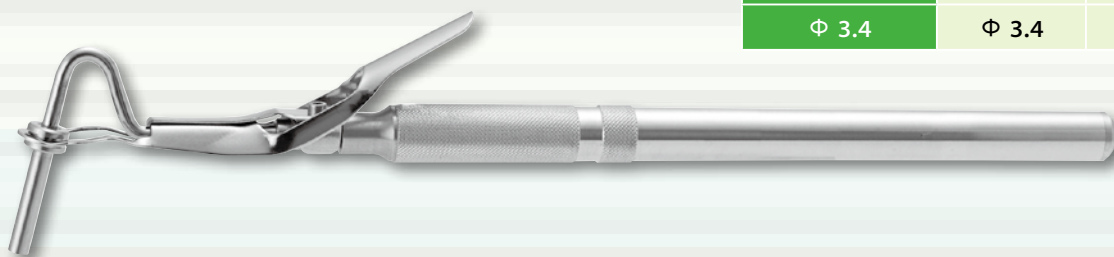


医療機器届出番号 11B1X1000658D126 一般的名称 歯科用インプラント手術器具

◆フィクスチャーの埋入やスクリューの締結に ラチェットレンチ

コード No.151627 標準価格 ¥20,000

- ヘッドが小さくラチェット式の為、狭い部位での操作が可能です。
- ラチェットを戻す際に振動しない為、患者さんに不快感を与えません。

※対応規格：4 mmスクエア

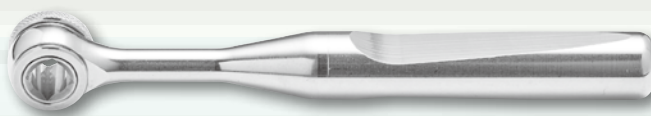

※ヘッド部径：Φ 10 mm

医療機器届出番号 11B1X1000658D802 一般的名称 手術用レンチ

※掲載されているコードNo.は、発売元(株)モリタのコードNo.です。
※掲載製品の標準価格は、2015年2月1日現在のものです。※標準価格に消費税は含まれておりません。
※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

製造販売元 **株式会社YDM**
〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006
問合先 デンタル事業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3828-3161 FAX03-3827-8991
<http://www.ydm.co.jp/> E-mail ydm@ydm.co.jp

発売 **株式会社モリタ**
大阪 〒564-8650 吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL06-6380-2525
東京 〒110-8513 台東区上野2丁目11番15号 TEL03-3834-6161
<http://www.dental-plaza.com/>