

口腔内撮影ミラー

(滅菌用保護袋付)

ステンレス製


高硬度ステンレス鋼を採用

- 一般的なステンレス鋼に比べて硬度が高い為、傷がつきにくく、ゆがみの少ないミラーです。

※お取扱い方法によっては傷がつきますのでご注意ください。

硬度比較（ビッカース硬度）

【YDM 口腔内撮影ミラー】 高硬度ステンレス鋼 + ロジウムコーティング	約 533HV
【YDM 口腔内撮影ミラー ST・SE】 高硬度ステンレス鋼	約 369HV
【一般的なロジウムコーティングステンレス製ミラー】 一般的なステンレス鋼 + ロジウムコーティング	約 240HV
【一般的なステンレス製ミラー】 一般的なステンレス鋼	約 198HV

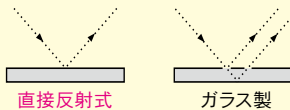

直接反射式なので、
写った像がダブリません。



- 中央が屈曲しているため、持ちやすく、また、持った手が邪魔になりません。

※ロジウムコーティング

※反射率 約 85%

- ロジウムコーティングで、明るいミラーです。

コードNo.	品 名	標準価格
13578	咬合面用 ワイド LL	¥24,900
13576	咬合面用 ワイド L	各¥15,800
13577	咬合面用 ワイド S	
13571	咬合面用	
13572	舌側用	
13573	頬側用	¥47,400
13570	3 枚組 (咬合面用・舌側用・頬側用)	


ST

※反射率 約 65%

- 使いやすさはそのまま、エコノミータイプです。

コードNo.	品 名	標準価格
13266	ST 咬合面用 ワイド LL	¥10,800
13264	ST 咬合面用 ワイド L	各¥9,700
13265	ST 咬合面用 ワイド S	
13561	ST 咬合面用	
13262	ST 舌側用	
13263	ST 頬側用	

- 特に広い歯列弓の方に！
前歯撮影部分も64mmと広く設定しています。

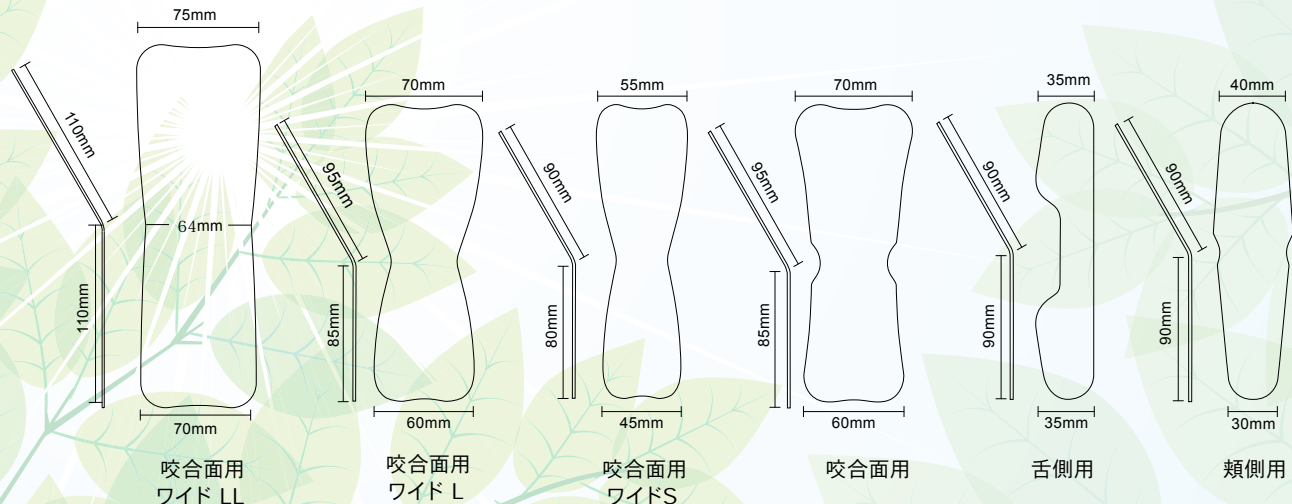

医療機器届出番号 11B1X1000625D004
ST 医療機器届出番号 11B1X1000625D014
一般の名称 歯鏡

口腔内撮影ミラー SE

ステンレス製

●特に広い
歯列弓の方に!



咬合面用 LL

咬合面用 L


咬合面用 M

頬舌側用

- ステンレス製なので割れずに安心です。
- 直接反射式なので写った像がダブリません。

※反射率 約 65%
※滅菌用保護袋付

コードNo.	品 名	標準価格	サイズ mm	
			a	b
13274	咬合面用 LL	¥8,050	75	155
13272	咬合面用 L	各 ¥7,300	74	140
13273	咬合面用 M		65	140
13271	頬舌側用		29	140

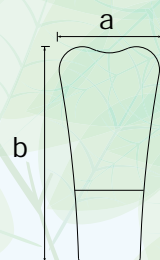

口腔内撮影ミラーの寿命をながくするための理想的な洗浄・滅菌

①浸漬洗浄

②水洗

③乾燥

④オートクレーブ
滅菌・乾燥

①「Z-1 eco ファインリキッド」等の洗浄液へ浸漬し、タンパク質等の汚れを確実に落とします。

★残存した汚れ→ **シミ・サビ**

超音波洗浄は鏡面に傷がつく恐れがあるのでお避けください。

★超音波洗浄→ **キズ**

②流水で洗浄液を洗い流します。

★残存した洗浄液→ **シミ・サビ**

③マイクロファイバークロス等の糸屑のでない柔らかい布で、こすらずに水分を取り除きます。

★残存した水分（水道水中の塩素、ミネラル等）→ **シミ・サビ**

④他の器具と接触しないように、また滅菌パックの接着成分等が鏡面につかないように、付属の滅菌用保護袋に入れ、鏡面を下向きにして滅菌して下さい。

★器具同士の接触→ **キズ**

★接着成分等の付着→ **シミ**

確実に乾燥させて保管します。

★残存した水分→ **シミ・サビ**

※水洗・滅菌に使用する水は精製水（純水）をおすすめします。

水道水に含まれる塩素、ミネラル等の不純物が **シミ・サビ** の原因となります。



医療用アルカリ性防錆洗浄液
「ゼットワン eco ファインリキッド」


医療機器届出番号 11B1X1000625D015 一般的名称 歯鏡

口角鉤 アングルワイダー

標準価格 各 ¥9,900(2入)



コードNo.22745

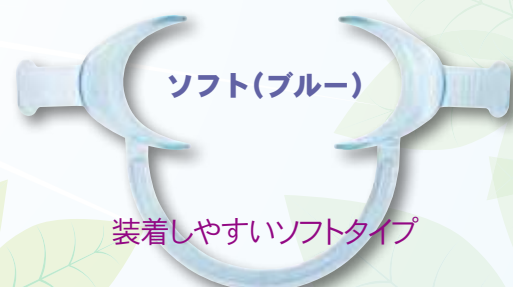


ソフト(ブルー)

コードNo.22729

装着しやすいソフトタイプ

- 補助者なしで口角を排除し、視野を確保できます。

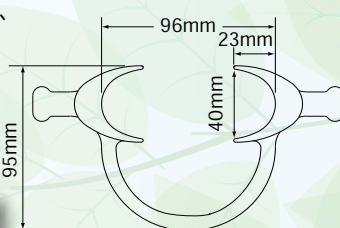

口腔ケアにも便利です。

※材質／TPX 耐熱温度 160℃
※乾熱滅菌・紫外線殺菌は、お避け下さい。

医療機器届出番号 11B1X1000650D204 一般的名称 歯科用開口器

コントラスター

標準価格 各 ¥4,000



前歯用 L

コードNo.13641


前歯用 S

コードNo.13643

臼歯用

コードNo.13642

被写体がハッキリ
診査精度が UP

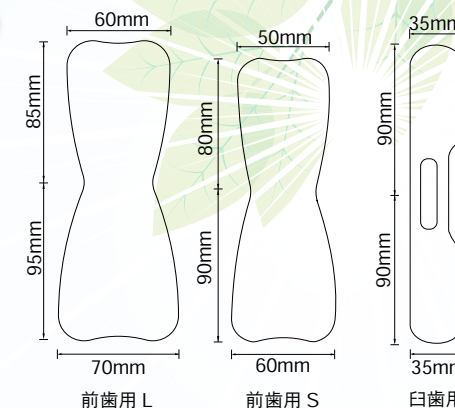

前歯用 L

前歯用 S

臼歯用



コントラスター使用



通常撮影



- 写真の背景を黒くすることにより、歯牙の形態や色調が明確になります。
- シェード合わせや充填後の確認にも有効です。

※黒色塗装部／材質 フッ素樹脂 耐熱温度 200℃

医療機器届出番号 11B1X1000625D005 一般的名称 歯鏡

口角鉤 ダブルワイダー

標準価格 各 ¥4,850(2入)

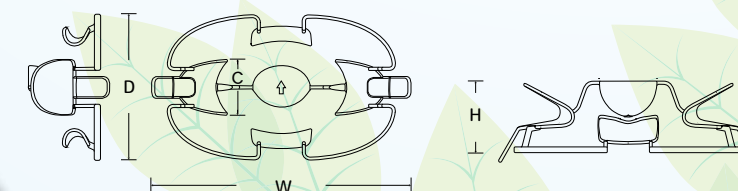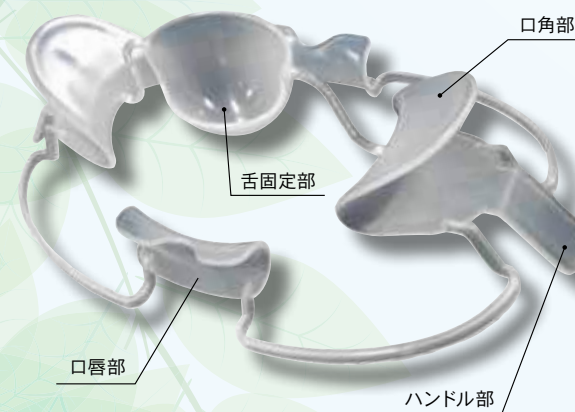

口角・口唇をバランス良く排除

- ホワイトニング・矯正治療のブラケット装着時に有効です。
- やわらかいので長時間装着時の負担が軽減されます。

コードNo.	品名	種類	サイズ mm			
			W	D	H	C
22725	SS	ジュニア	157	80	42	25
22749	S	スタンダード	161	90	50.5	35
22750	L	ラージ	171	96	54.5	38



※舌固定部は、切断して使用することもできます。



①舌固定部の矢印を上向きにし、ハンドル部をひねり、左右の口角に装着します。



②上下の口唇に装着します。



※材質／PP 耐熱温度 120℃
※乾熱滅菌・紫外線殺菌は、お避け下さい。

医療機器届出番号 11B1X1000650D205 一般的名称 歯科用開口器

口角鉤

標準価格 各¥3,100(2入)

A



コードNo.22731

B



コードNo.22732

『小児用』『咬合面撮影時の口唇鉤』 の2WAYS

D



コードNo.22734

※材質／TPX 耐熱温度 160℃
※乾熱滅菌・紫外線殺菌は、お避け下さい。

C

コードNo.22733

標準価格 ¥2,450(2入)



口唇排除用フック



咬合面撮影使用時



口角鉤D



通常の口角鉤

- 口唇から口角上部(下顎撮影時は下部)までの範囲で装着される為、口角鉤がミラー挿入の妨げになりません。
- 撮影時、口角鉤がミラーに写り込むことなく、口唇と頬粘膜をしっかり排除できます。

医療機器届出番号 11B1X1000650D204 一般的名称 歯科用開口器


ピジョン

標準価格 各¥5,850

深側部まで
しっかり排除



※材質／TPX 耐熱温度 160℃
※乾熱滅菌・紫外線殺菌は、お避け下さい。

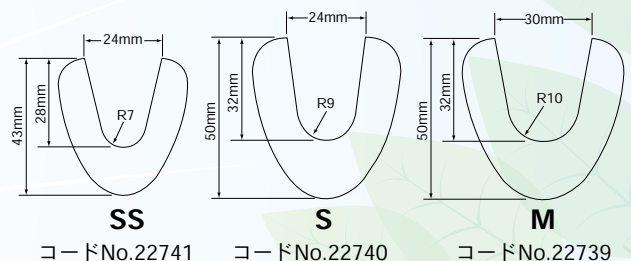

SS

S

M

コードNo.22741

コードNo.22740

コードNo.22739

- 深いU字形状なので矯正治療などのミラーを使用しない側方部撮影の際、深側部まで排除できます。

医療機器届出番号 11B1X1000650D204 一般的名称 歯科用開口器

※掲載製品の標準価格は、2017年12月21日現在のものです。※標準価格に消費税は含まれておりません。
※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

製造販売元 **株式会社YDM**

〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006

問 合 先 デンタル事業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3828-3161 FAX03-3827-8991
<http://www.ydm.co.jp/> E-mail ydm@ydm.co.jp

発売 **株式会社モリタ**

大阪 〒564-8650 吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL06-6380-2525
東京 〒110-8513 台東区上野2丁目11番15号 TEL03-3834-6161
<http://www.dental-plaza.com/>